

セット・統合セット

Medi-Aibis

1. セットの作成	1
1.1 セット範囲選択	1
1.2 セットの適用	2
2. 統合セットの作成	3
2.1 オーダー一覧表	3
2.2 統合セット登録	3
2.3 統合セットの適用	4
3. フォルダの作成	5
3.1 新規フォルダ作成	5
4. セット移動	6
4.1 順序入れ替え	6
4.2 切り取り・貼り付け	6
5. リンク作成	7
5.1 リンク元コピー	7
5.2 リンク先貼り付け	7
6. その他機能	8
6.1 同一文書番号からの文書履歴	8

1. セットの作成

1.1 セット範囲選択

診療予定		処方
処方		
Rp	薬品/用法	用量
No.100012283【新規作成】2008年7月23日(水) [保険]国保7本 老27 院内 開始日:2008年7月23日(水) 寝る前 薬剤情報提供なし		
1	滅菌精製水 500ml/本 医師の指示通りに使用	
2	キシロカインゼリー 30ml 医師の指示通りに塗布	

診療予定		処方
処方		
Rp	薬品/用法	用
No.100012283【新規作成】2008年7月23日(水) [保険]国保7本 老27 院内 開始日:2008年7月23日(水) 薬剤情報提供なし		
1	滅菌精製水 500ml/本 医師の指示通りに使用	
2	キシロカインゼリー 30ml 医師の指示通りに塗布	

右クリック

- ファンクション(F)
 - 挿入
 - 削除
 - 全削除
 - 切り取り(T)
 - コピー(C)
 - 貼り付け(P)
 - 挿入・貼り付け
 - セット登録**
 - 患者禁忌薬登録
 - 診察終了
 - 薬価/購入価
 - Rp薬価合計

- ① 各オーダ内容入力画面内にて、編集中心（未登録）のオーダをセットとして登録することができます。
- ② 各オーダ入力画面内にて、セット登録を行う範囲を、マウสดラッグで選択して下さい。（ここでは処方オーダを指定しています）
- ③ 選択した状態で、マウス右クリックメニューより「セット登録」を選択して下さい。

- ④ 「セット登録」画面が表示されます。
- ⑤ 「セット名」にテキスト入力して下さい。
- ⑥ 「セット区分」については、院内共通・診療科共通・利用者固有から選択して下さい。
- ⑦ 画面右下「登録」をクリックで、セット登録されます。
※登録されたセットは全患者に適用できます。

1.2 セットの適用

- ① 「指示歴」画面上「処方セット」タブより、セット名をダブルクリックで選択して下さい。
※オーダセットタブは表示中のオーダと連動します。

処方*			
Rp	薬品/用法	用量	単位
No.100012283【新規作成】2008年7月23日(水) 【保険】国保7本 老27 院内 開始日:2008年7月23日(水) 寝る前 薬剤情報提供なし			
1	滅菌精製水 500ml/本 医師の指示通りに使用	1	本
2	キシロカインゼリー 30ml 医師の指示通りに塗布	1	本

- ② オーダ内容入力画面内にセットが展開されます。

2. 統合セットの作成

2.1 オーダー一覧表

診療予定 全文書ビュー 放射線*							
診療予定							
全体							
< = >		2010/01/19(火)	2010/01/20(水)	2010/01/21(木)	2010/01/22(金)	2010/01/23(土)	2010/01/24(日)
オーダー一覧	処方			⇒/▲	⇒		
	注射	○	○	▲			
	検体			○	▲		
	微生物						
	病理						
	輸血						
	血液ガス						
	食事						
	栄養指導						
	リハビリ						
	生理		○	○			
	放射線		○				
	処置			▲			
	手術予約						
	診療予約	○	○	○			
	文書作成						
	ｽﾏｰﾝ						
	病名						
	ﾌｫﾛﾎﾟﾐ						
	SOAP						
	初診時追加						
	その他記録						
	ﾏﾘ						

① 各オーダー内容・入院指示について、各画面よりオーダー入力を行い、[診療予定]画面内[オーダー一覧]を表示します。

② 入力されているオーダーと日付の欄に[○]・[▲]マークが表示されます(簡易表示の場合)。
[○]はオーダー発行済、[▲]は未登録オーダーです。統合セットは[▲]の未登録オーダーをセット対象とします。
[指示歴セット登録対象]を選択すると、[○]の発行済オーダーもセット登録することができます。

③ 入力されているオーダーのみに表示を絞り込みたい場合は、マウス右クリックメニューより、[オーダーのあるオーダー種表示]を選択して下さい。

2.2 統合セット登録

25(火)	2008/03/26(水)	2008/03/27(木)	2008/03/28(金)	2008/03/29(土)
	⇒/▲	⇒	⇒	⇒
	○/▲	○	○	○
	▲			
	○	○	⇒	⇒
	▲			
	○	▲	⇒	⇒
		⇒	⇒	⇒



3/26(水)	2008/03/27(木)	2008/03/28(金)	2008/03/29(土)
▲	⇒	⇒	⇒
▲	○	○	○
▲	○	○	○
▲	○	○	○
○	⇒	⇒	⇒

右クリック

Do
統合セット登録
<input checked="" type="checkbox"/> 簡易表示
<input type="checkbox"/> サマリ表示
<input type="checkbox"/> 詳細表示
<input checked="" type="checkbox"/> オーダーのあるオーダー種表示
<input type="checkbox"/> オーダー番号表示
<input checked="" type="checkbox"/> 指示歴セット登録対象
<input type="checkbox"/> 体温表
<input checked="" type="checkbox"/> オーダー一覧
<input type="checkbox"/> 入院指示
<input type="checkbox"/> 観察項目
<input type="checkbox"/> 体温表・観察項目のみ
<input type="checkbox"/> オーダー一覧のみ
<input type="checkbox"/> 入院指示のみ

① [オーダー一覧]画面内にて、セット登録を行う範囲を、マウスドラッグで選択して下さい。この時に[入院指示]項目を範囲に含めることができます。

② 選択した状態で、マウス右クリックメニューより、[統合セット登録]を選択して下さい。

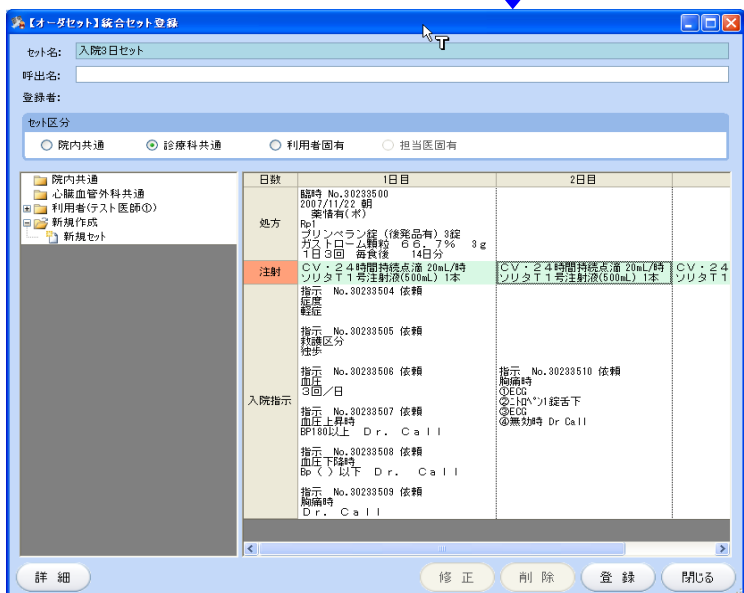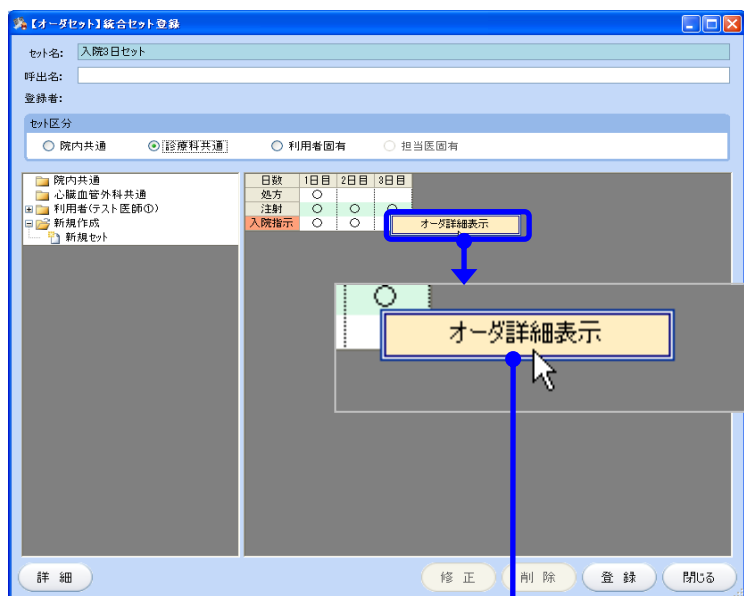

③ [統合セット登録]画面が表示されます。

④ [セット名]をテキスト入力して下さい。


⑤ [セット区分]については、院内共通・診療科共通・利用者固有から選択して下さい。

⑥ 画面内にて、マウス右ボタンクリックし、[オーダ詳細表示]を選択すると、オーダ内容が表示されます。

⑦ 画面右下[登録]をクリックで、セット登録されます。

※登録されたセットは全患者に適用できます。

2.3 統合セットの適用

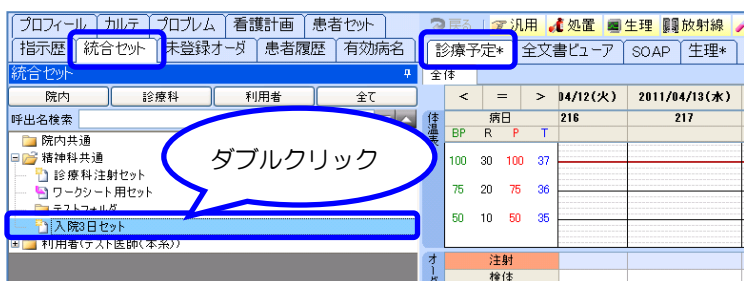



① [指示歴]画面上[統合セット]画面より、セット名をダブルクリックで選択して下さい。

※統合セットタブは診療予定画面を表示している場合にのみ表示されます。

② カレンダーが表示されますので、セットを展開する「1日目」の日付を選択して下さい。選択された日付より、統合セットを展開します。

3. フォルダの作成



3.1 新規フォルダ作成

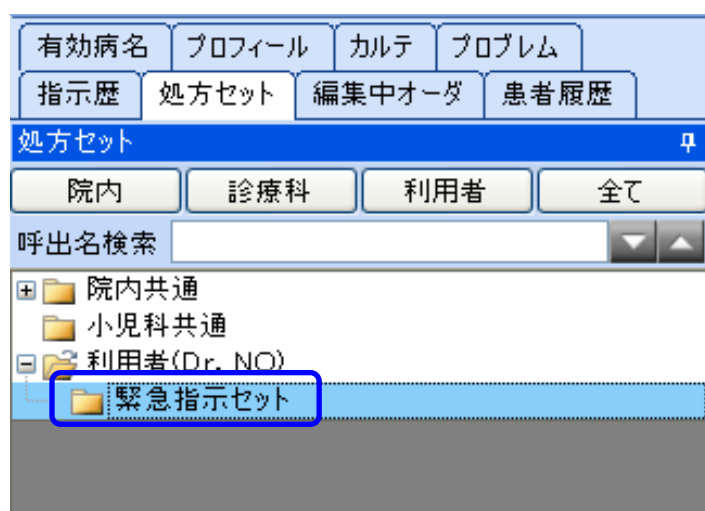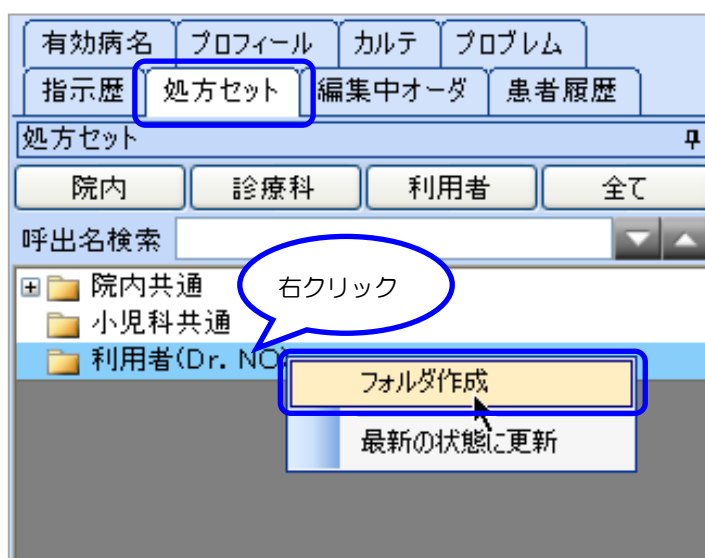


- ① 各オーダセットフォルダ・統合セットフォルダ階層下にフォルダを新規作成することができます。
- ② 「指示歴」画面上のセットタブを選択し、セット画面を表示させて下さい。
- ③ 院内共通・診療科共通・利用者固有から、フォルダを新規作成したいセット区分を選択し、マウス右クリックメニューより「フォルダ作成」を選択して下さい。
- ④ 「フォルダ名称入力」画面が表示されます。「フォルダ名」にテキスト入力して下さい。
- ⑤ [OK]をクリックすると、通知メッセージが表示され、指定フォルダ内にフォルダが新規作成され、階層下にツリー状態で表示されます。

4. セット移動

4.1 順序入れ替え

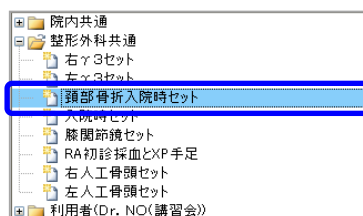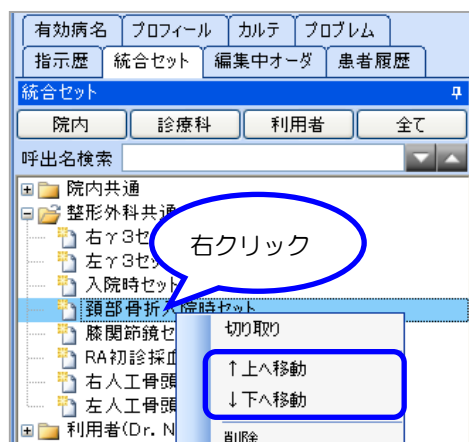



【↑へ移動】

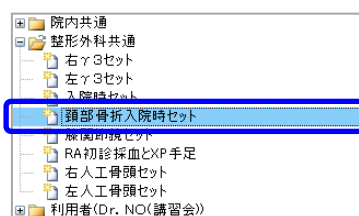


【↓へ移動】

- ① 同一階層のセットフォルダ内で、セットの順序を入れ替えることができます。
- ② 順序を入れ替えるセットを選択し、マウス右クリックメニューより「↑へ移動」もしくは「↓下へ移動」を選択して下さい。
- ③ 「↑へ移動」では一段上へ、「↓下へ移動」では一段下へセットが移動します。

4.2 切り取り・貼り付け

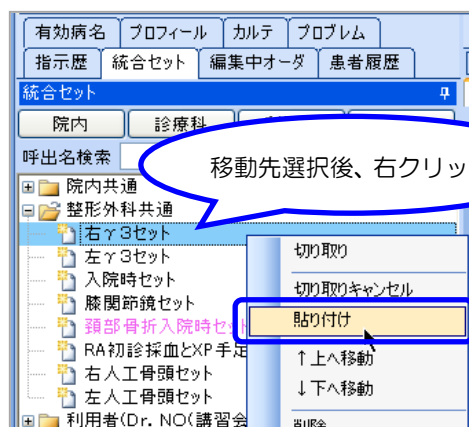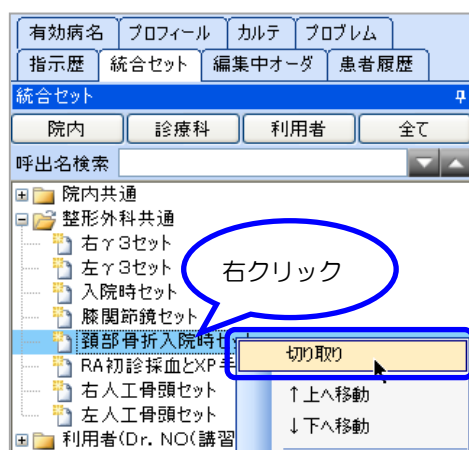


移動先選択後、右クリック

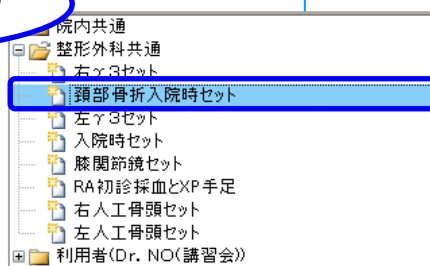

- ① 同じセット区分内のフォルダへは、セットの切り取り・貼り付けを行うことができます。
- ② 移動するセットを選択し、マウス右クリックメニューより「切り取り」を選択して下さい。
- ③ 移動先を選択し、マウス右クリックメニューより「貼り付け」を選択して下さい。
- ④ 移動先として指定したセット名の下に切り取ったセットが移動します。

5. リンク作成

5.1 リンク元コピー

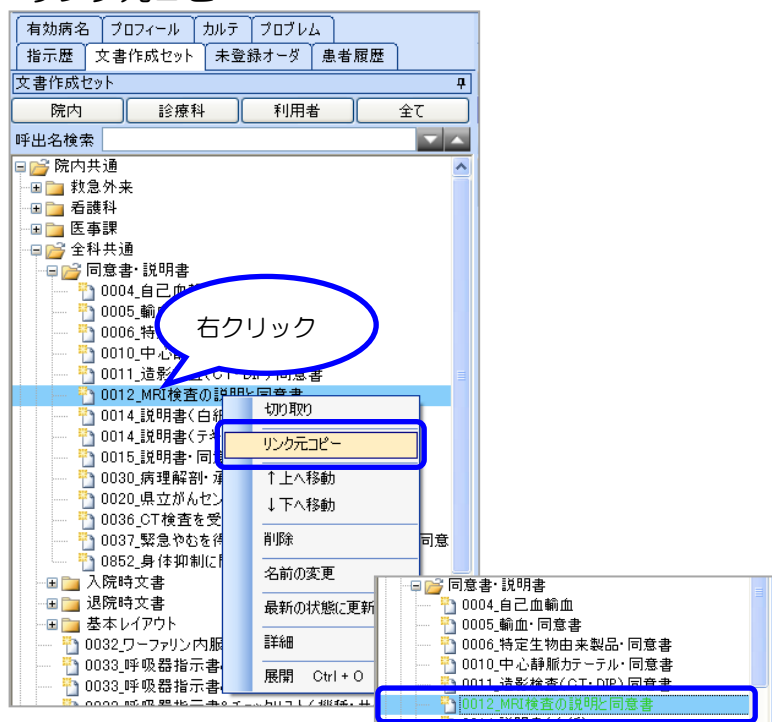


① リンク作成機能を使用し、別階層にもセットのショートカットキーを作成することができます。(患者セットは作成不可)

② 対象のセットを選択して、右クリックメニューより「リンク元コピー」を選択して下さい。(フォルダごとのリンクは作成できません)

③ コピーされたセット名が緑色表示されます。

※リンクセットもリンク元としてコピーできます。


5.2 リンク先貼り付け

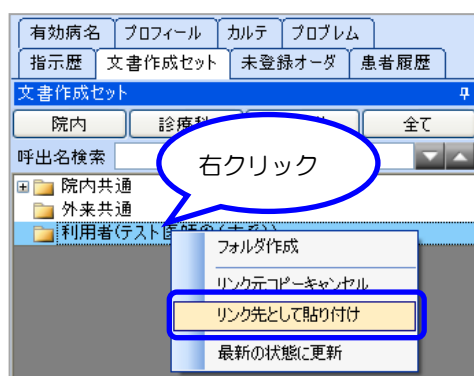

① コピーしたリンクセットを作成したい箇所を選択して、右クリックメニューより「リンク先として貼り付け」を選択して下さい。

② 作成箇所として、セット名を指定した場合はそのセットの下に、フォルダを指定した場合はそのフォルダの最下部に登録されます。



③ リンクセット貼り付け後、「リンク先セット名称入力」画面が表示されます。コピー元のセット名が表示されますので、変更する場合はセット名を入力し、[OK] をクリックして下さい。

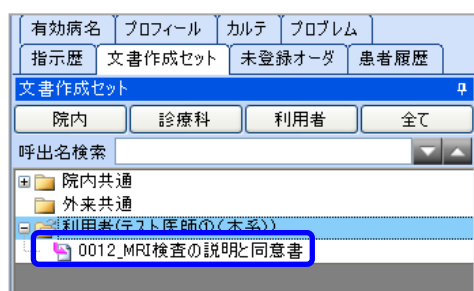

④ リンク先にセットが作成されます。
※リンク元のセットが修正・削除されると、リンク先のセットも同様に修正・削除されます。

6. その他機能

6.1 同一文書番号からの文書履歴

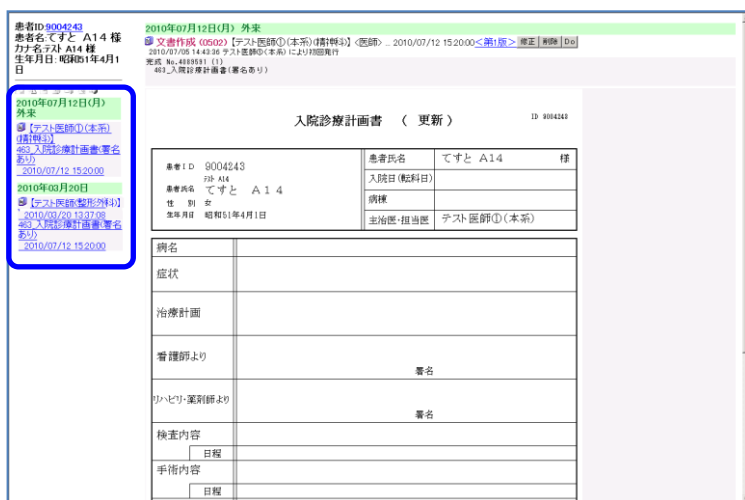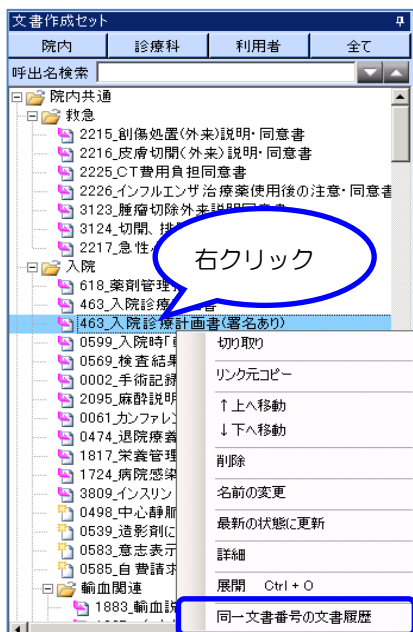

- ① 記録系セット（初診時カルテ・入院時カルテ・SOAP・その他記録・文書作成・サマリ）のセット名から選択中の患者に適用された文書の履歴を参照することができます。
- ② 記録系のセット名上でマウス右クリックメニューから[同一文書番号の文書履歴]を選択して下さい。
- ③ 指定したセットと同じ文書番号を持つ文書の履歴が表示されます。