


注 射

Medi-Aibis

1. 注射画面	1
1.1 注射入力画面	1
2. 新規入力基本操作	2
2.1 一括入力画面	2
2.2 日付選択	4
2.3 セット展開	5
2.4 Do 展開	5
3. 入力補助機能	6
3.1 回数入力	6
4. オーダ発行	7
4.1 診察終了	7
5. 事後入力	8
5.1 事後入力	8
6. 注射実施入力	9
6.1 実施入力画面	9
6.2 認証	9
6.3 画面入力	10

1. 注射画面

1.1 注射入力画面

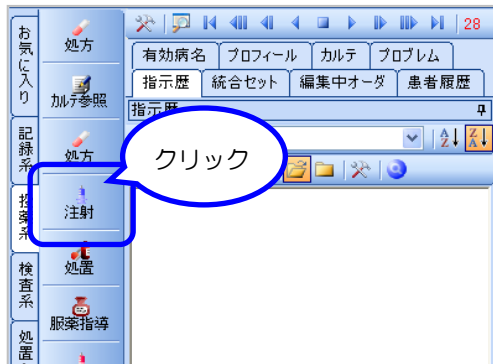

① 画面左側、機能ボタン〔投薬系〕タブ内〔注射〕をクリックして下さい。

② 注射オーダの依頼入力画面が表示されます。

診療予定 全文書ビュー 注射

注射指示履歴

○ 全件表示 ○ 最新のみ ○ 全中止・非表示

注射指示履歴

名称 一回量 単位 コメント

1 2013/01/31 ~ 2013/01/31

〔未入力〕

▼開始日を変更する場合: 右クリック 終了日を変更する場合: ダブルクリック

RP ステータス 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16

手技ルート選択

手技

名称

- ◎ 精密持続-点滴静脈内注射(div)
- ◎ 中心静脈内注射(IVH) 埋込型
- ◎ 精密持続-中心静脈内注射(IVH) 埋込型
- 静脈内注射(iv)
- 筋肉内注射(im)
- 皮下注射(sc)
- 皮内注射
- 局所注射
- 脊髄腔内注入(脳室)
- 脊髄腔内注入(後頭下)
- 脊髄腔内注入(腰椎)
- 関節腔内注入
- 腱鞘内注入
- 結膜下注射
- 角膜内注射
- 持続注射
- ◎ 精密持続(シリンジポンプ)
- 硝子体内注射
- 胸腔内注入
- 膀胱内注入
- 洗浄用
- 点滴静脈内注射(div)
- 中心静脈内注射(IVH)
- ◎ 精密持続-中心静脈内注射(IVH)

ルート

名称

- 指定無し
- メイン
- 側管

2. 新規入力基本操作

2.1 一括入力画面

① 「(未入力)」行をクリックし、右画面 [手技ルート選択]より手技とルートを選択して下さい。

② 手技行の下の方に薬品名を入力します。検索キーとなる文字（ひらがな 3 文字以上）を入力して下さい。

③ Enter キーを押下で、右画面に[薬品選択]画面が表示されます。該当の薬剤を選択して下さい。

④ 一回量の枠へ投与量を入力します。右画面の[数量入力]画面より数字を選択するか、直接数字を入力して下さい。

⑤ 投与量を入力後、空行で Enter キーを押下すると、右画面に[用法選択]画面が表示されます。

用法選択

1日2回

1日2回

朝 昼 夕	夜 OP前 OP中	OP後 出棟時 帰室時
当日		
<input checked="" type="checkbox"/> 6:00	<input type="checkbox"/> 12:00	<input type="checkbox"/> 18:00
<input type="checkbox"/> 7:00	<input type="checkbox"/> 13:00	<input type="checkbox"/> 19:00
<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 14:00	<input type="checkbox"/> 20:00
<input type="checkbox"/> 9:00	<input checked="" type="checkbox"/> 15:00	<input type="checkbox"/> 21:00
<input type="checkbox"/> 10:00	<input type="checkbox"/> 16:00	<input type="checkbox"/> 22:00
<input type="checkbox"/> 11:00	<input type="checkbox"/> 17:00	<input type="checkbox"/> 23:00
翌日		
<input type="checkbox"/> 0:00	<input type="checkbox"/> 2:00	<input type="checkbox"/> 4:00
<input type="checkbox"/> 1:00	<input type="checkbox"/> 3:00	<input type="checkbox"/> 5:00

4h間隔 6h間隔 8h間隔 0 1h間隔

速度指定

コメント

確定

開始時刻 06:00 15:00

初日 1 回目から

終了日 2 回目まで

0 日あき

日付選択

⑥ 1 日の投与回数と投与タイミングを入力します。投与タイミングはプルダウンメニューから選択できます。タイミングを任意で選択したい場合は、タイミングを下のチェックボックスから選択できます。15 分単位で時間の変更も可能です。速度指定や日付選択もできます。

⑦ 用法を入力したら「確定」ボタンで完了して下さい。

2.2 日付選択

RP	実施期間	名称	一回量	単位
1	2013/01/19 ~ 2013/01/19	①精密持続-点滴静脈内注射(div) ソルデム1輸液 200mL 1日1回 未選択	1	袋

クリック

From: 2013/01/19 To: 2013/01/20

2013年1月

日	月	火	水	木	金	土
1	元日	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

OK キャンセル

RP	実施期間	名称	一回量	単位	コメント
1	2013/01/19 ~ 2013/01/19	①精密持続-点滴静脈内注射(div) ソルデム1輸液 200mL 1日1回 (未) (15:00)	1	袋	
2	2013/01/19 ~ 2013/01/19	②精密持続-点滴静脈内注射(div) ソルデム1輸液 500mL 1日2回 (未) (15:00)	1	袋	
3	2013/01/19 ~ 2013/01/19	(未入力)			

用法選択

1日2回

1日2回

朝	夜	OP後
昼	OP前	出棟時
夕	OP中	入室時
<input checked="" type="checkbox"/> 6:00	<input type="checkbox"/> 12:00	<input type="checkbox"/> 18:00
<input type="checkbox"/> 7:00	<input type="checkbox"/> 13:00	<input type="checkbox"/> 19:00
<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 14:00	<input type="checkbox"/> 20:00
<input type="checkbox"/> 9:00	<input checked="" type="checkbox"/> 15:00	<input type="checkbox"/> 21:00
<input type="checkbox"/> 10:00	<input type="checkbox"/> 16:00	<input type="checkbox"/> 22:00
<input type="checkbox"/> 11:00	<input type="checkbox"/> 17:00	<input type="checkbox"/> 23:00
翌日		
<input type="checkbox"/> 0:00	<input type="checkbox"/> 2:00	<input type="checkbox"/> 4:00
<input type="checkbox"/> 1:00	<input type="checkbox"/> 3:00	<input type="checkbox"/> 5:00

4時間隔 6時間隔 8時間隔 0 12時間隔

速度指定

コメント

開始時刻 06:00 終了日 2 回目から 回目まで

日付選択

日付選択

2013/01/26 2013/02/09

日 月 火 水 木 金 土

日	月	火	水	木	金	土
2013年1月27	28	29	30	31	1	2
2013年2月3	4	5	6	7	8	9


OK キャンセル

① 伝票の日付行をクリックするとカレンダー画面が表示され期間を指定できます。

② また、確定した注射オーダが下画面にカレンダー表示されます。開始日・終了日を変更する場合は、開始日として日付の上で右クリック、終了日として日付の上でダブルクリックすると、開始日・終了日を変更できます。


③ また、用法入力時に「用法選択」画面の「日付選択」よりカレンダーからの選択もできます。日付が隔日になる場合等は、カレンダー画面より入力して下さい。

2.3 セット展開

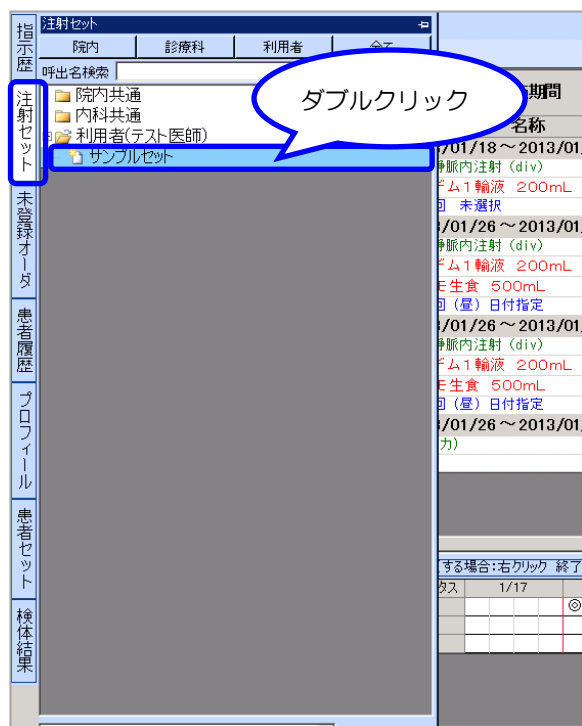

- ① [指示歴] 画面上 [注射セット] タブを選択して下さい。セットは「院内共通」「診療科共通」「利用者固有」セットでフォルダが分かれており、各フォルダ名上をダブルクリックすると階層下のセット名が表示されます。該当セット名上をダブルクリックで選択入力画面内へ展開します。
- ② 依頼入力画面に、当日の日付でセット展開した依頼内容が表示されます。

2.4 D○展開

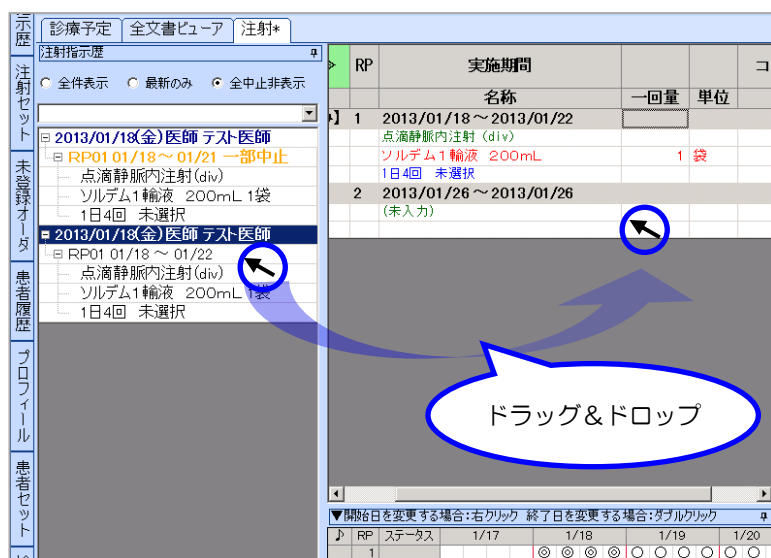

- ① [注射] タブに表示されている発行済みの注射をマウスでドラッグ&ドロップの操作をすると、入力画面内へ移動させ展開することができます。
- ② 依頼入力画面に、当日の日付でセット展開した依頼内容が表示されます。

3. 入力補助機能

3.1 回数入力

The top screenshot shows the '用法選択' (Usage Selection) screen. A dropdown menu is open, showing options for frequency (回数) and timing (タイミング). The bottom screenshot shows the same screen after selecting '1日4回' (4 times a day) and '4h間隔' (4h interval). The time slots are updated to reflect these selections.

用法選択

回数: 1日4回

タイミング: 未選択

時間一覧:

朝	夜	OP後
昼	OP前	出棟時
夕	OP中	帰宅時
<input checked="" type="checkbox"/> 06:00	<input type="checkbox"/> 12:00	<input checked="" type="checkbox"/> 18:00
<input type="checkbox"/> 07:00	<input type="checkbox"/> 13:00	<input type="checkbox"/> 19:00
<input type="checkbox"/> 08:00	<input checked="" type="checkbox"/> 14:00	<input type="checkbox"/> 20:00
<input type="checkbox"/> 09:00	<input type="checkbox"/> 15:00	<input type="checkbox"/> 21:00
<input checked="" type="checkbox"/> 10:00	<input type="checkbox"/> 16:00	<input type="checkbox"/> 22:00
<input type="checkbox"/> 11:00	<input type="checkbox"/> 17:00	<input type="checkbox"/> 23:00
翌日		
<input type="checkbox"/> 00:00	<input type="checkbox"/> 02:00	<input type="checkbox"/> 04:00
<input type="checkbox"/> 01:00	<input type="checkbox"/> 03:00	<input type="checkbox"/> 05:00

4h間隔 6h間隔 8h間隔 0 h間隔

速度指定: 0

コメント:

開始時刻: 06:00

初日: 1 回目から

終了日: 4 回目まで

日付選択

① 「用法選択」画面で回数／日の入力が行えます。1行目で1日の回数を選択して下さい。

② 2行目でタイミングを選択します。該当の時間タイミングがない場合は「1日●回」行を選択すると、その下のタイミング・時間一覧より任意のタイミング・時間を選択できます。

③ 1回目の時間を選択した後に、「4h間隔」「6h間隔」「8h間隔」「●h間隔」ボタンをクリックすると、選択した時間間隔で時間が自動取得されます。

5. 事後入力

5.1 事後入力

		RP	実施期間	
			名称	一回量
[追加]	1		2013/01/26 ~ 2013/01/26	
			(未入力)	

		RP	実施期間	
			名称	一回量
[追加]	1		2013/01/26 ~ 2013/01/26	
			(未入力)	

- ① 注射の事後入力を行う場合は、[伝票変更] (F2) を選択して下さい。伝票の区分が「事後」へ変更されます（同じ操作で、事後から臨時（通常）に戻すことができます）。

6. 注射実施入力

6.1 実施入力画面

お気に入り 患者基本 投薬系 検査系 加	処方	指示歴	戻る(処方) 処方
	注射		診療予定 全文書
	注射実施		ルート 手技
	DICS参照(DI)		2013/01/26 ~ 2013/01/26
	薬歴		点滴静脈
		未登録	2013/01/18 ~ 2013/01/18
			2013/01/18 ~ 2013/01/18

注射実施入力

表示

患者単位

病棟単位

テスト 1

身長: 167.0 cm

体重: 60.0 kg

体表面積: 1.6732 m²

2019/01

2019/02

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

4

※(体表面積) × (身長) × 体重 × 0.007184

表示変更

☐ オープン
☒ 取込済み
☒ 実施済
☒ 削除済み
☒ 中止

☐ 入院病棟
☐ 依頼部署

表示更新

2013/01/18

全て選択

全て解除

☐ 未実施一覧表示

☒ 予定指定オープンを含む

表示種: 時間

日	時間	選択状態	手続コード	用法	速度	実施	実施者	指示区	依頼部署	オーダー番号
1回目		●実施	点液静脈内注射(dio)	1日4回 未選択		16.44	テスト医師	テスト医師	内科	10000674
		ソラデム1輪	200mL		1錠					
2回目		×中止	点液静脈内注射(dio)	1日4回 未選択				テスト医師	内科	10000675
		ソラデム1輪	200mL		1錠					
3回目		●実施	点液静脈内注射(dio)	1日4回 未選択		16.55	テスト医師	テスト医師	内科	10000676
		ソラデム1輪	200mL		1錠					
4回目		◎取込済み	点液静脈内注射(dio)	1日4回 未選択				テスト医師	内科	10000677
		ソラデム1輪	200mL		1錠					
1回目		◎取込済み	点液静脈内注射(dio)	1日4回 未選択				テスト医師	内科	10000709
		ソラデム1輪	200mL		1錠					
2回目		◎取込済み	点液静脈内注射(dio)	1日4回 未選択				テスト医師	内科	10000710
		ソラデム1輪	200mL		1錠					
3回目		◎取込済み	点液静脈内注射(dio)	1日4回 未選択				テスト医師	内科	10000711
		ソラデム1輪	200mL		1錠					
4回目		◎取込済み	点液静脈内注射(dio)	1日4回 未選択				テスト医師	内科	10000712
		ソラデム1輪	200mL		1錠					

実施一覧印刷

処方票再印刷

オペ再印刷

実施

実施履歴

終了

① 画面左側、機能ボタン〔投薬系〕タブ
内〔注射実施〕を選択して下さい。

② 「注射実施入力」画面が表示されます。
画面上部にカレンダーが表示されます。
「※」が表示されている日付は注射オーダがある日付です。「※」印をクリックすると画面下部に指定日のオーダが表示されます。

③ 右上の「表示変更」で、表示する注射
オーダの状態を選択できます。

6.2 認証

注射実施入力

表示 患者単位 内服単位

テスト 1
身長: 167.0 cm
体重: 60.0 kg
体表面積: 1.6732 m²

※ (体表面積) = (身長)^{0.725} × (体重)^{0.425} × 0.007184

2013/01/18 金曜選択 金曜解除

☐ 非実施一覧表示 ☒ 翌日指定オラゲを含む

表示欄: 両側

表示変更

☐ オラゲ
☐ 取込済み
☐ 実施
☐ 削除済み
☐ 中止

☐ 入院治療
☐ 依頼書
☐ 内服薬

表示更新

日	時刻	選択状態	手術・ルート	用法	速度	実施	実施者	指示値	依頼部署	オラゲ番号
1回目		●実施	点滴静脈内注射 (d.v.)	1日4回 未選択		16.44	テト薬師医師	テト医師	内科	10000674
		ソルデム1輸液	200mL	1袋						
2回目		×中止	点滴静脈内注射 (d.v.)	1日4回 未選択				テト医師	内科	10000675
		ソルデム1輸液	200mL	1袋						
3回目		●実施	点滴静脈内注射 (d.v.)	1日4回 未選択		16.55	テト薬師医師	テト医師	内科	10000676
		ソルデム1輸液	200mL	1袋						
4回目		◎取込済み	点滴静脈内注射 (d.v.)	1日4回 未選択				テト医師	内科	10000677
		ソルデム1輸液	200mL	1袋						
1回目		◎取込済み	点滴静脈内注射 (d.v.)	1日4回 未選択				テト医師	内科	10000709
		ソルデム1輸液	200mL	1袋						
2回目		◎取込済み	点滴静脈内注射 (d.v.)	1日4回 未選択				テト医師	内科	10000710
		ソルデム1輸液	200mL	1袋						
3回目		◎取込済み	点滴静脈内注射 (d.v.)	1日4回 未選択				テト医師	内科	10000711
		ソルデム1輸液	200mL	1袋						
4回目		◎取込済み	点滴静脈内注射 (d.v.)	1日4回 未選択				テト医師	内科	10000712
		ソルデム1輸液	200mL	1袋						

実施一括印刷 払出票再印刷 べリタ再印刷

実施手続 終了

① 注射を3点認証する場合は、認証する注射オーダ行を選択し、「実施準備」を選択します。

② ラベルが印刷され、3点認証が行えます。

6.3 画面入力

回数	薬剤名	点滅静脈内注射 (div)	1日4回 未選択	1袋	1655	テスト医師	テスト医師	内科	10000676
3回目	●実施	点滅静脈内注射 (div)	1日4回 未選択	1袋					
4回目	●取込済み	点滅静脈内注射 (div)	1日4回 未選択	1袋			テスト医師	内科	10000677
1回目	●取込済み	点滅静脈内注射 (div)	1日4回 未選択	1袋			テスト医師	内科	10000709
2回目	●取込済み	点滅静脈内注射 (div)	1日4回 未選択	1袋			テスト医師	内科	10000710
3回目	●取込済み	点滅静脈内注射 (div)	1日4回 未選択	1袋			テスト医師	内科	10000711
4回目	●取込済み	点滅静脈内注射 (div)	1日4回 未選択	1袋			テスト医師	内科	10000712

実施一覧印刷 印刷再印刷 ラベル再印刷 **実施** 実施手続 閉じる

実施者登録

操作者のバーコードを読み取ってください

OK キャンセル

【注射実施】注射チェック

テスト医師<ish01> 患者

実施注射バーコードを読み取ってください

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

注射

【注射実施】注射チェック

BSN医師<ish01> 患者

実施患者バーコードを読み取ってください

身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

注射 取込済み 1104625

オーグ日時 2015/03/05 09:56 指示医 BSN医師

患者 注射

閉じる

【注射実施】注射チェック

テスト医師<ish01> 患者 99910026 テスト 1

身長 167.0cm 体重 60.0kg 体表面積 1.6732m²

注射 取込済み 10000677

オーグ日時 2013/01/18 16:07 指示医 テスト医師

【定期】 内科

2013/01/18 1日4回 未選択 4回目

薬剤名	数量	コスト
ソルダム1輸液 200mL	1袋	1
点滅静脈内注射 (div)		

患者 注射

閉じる

【注射実施】実施時間登録(10000677)

現在登録日時 2013/01/26 15:01

変更日時 2013/01/26 15:01

OK キャンセル

① 「実施」ボタンを選択します。

② 「実施者登録」画面が表示されます。
操作者（実施者）のバーコードを読み込んで下さい。

③ 「注射チェック」画面が表示されます。
注射ラベル、患者 ID を読み込んで下さい。

④ 「実施時間登録」画面が表示されます。
実施した日時を入力して下さい。