


放射線

Medi-Aibis

1. 放射線検査画面	1
1.1 放射線検査入力画面	1
2. 新規入力基本操作	2
2.1 撮影項目の選択	2
3. コメント入力	3
3.1 コメント	3
3.2 コメント定型文登録	4
3.3 禁忌コメント	5
4. 検査予定日の設定	6
4.1 予約なし検査	6
4.2 オープン予約検査	7
4.3 本日検査	8
4.4 未確予約	8
4.5 オンコール	9
5. 繰り返し検査	10
5.1 同日繰り返し	10
5.2 日付指定繰り返し	11
5.3 日付選択画面	12
6. オーダ発行	13
6.1 診察終了	13
7. DO	14
7.1 指示歴からのDO	14
8. オーダの修正・削除	14
8.1 修正	14
8.2 取り消し	15
9. 結果参照	16
9.1 画像・レポート参照	16
10. その他の機能	17
10.1 内容確認	17
10.2 実施情報	17

1. 放射線検査画面

1.1 放射線検査入力画面


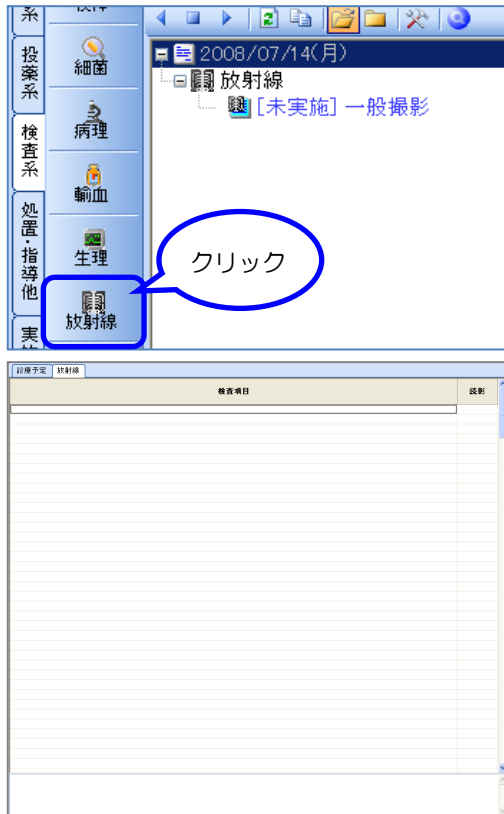


① 画面左側、機能ボタン「検査系」タブ内「放射線」をクリックして下さい。

② 放射線検査オーダ入力画面が表示されます。

2. 新規入力基本操作

2.1 撮影項目の選択

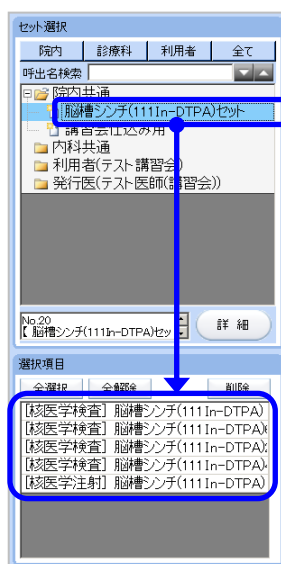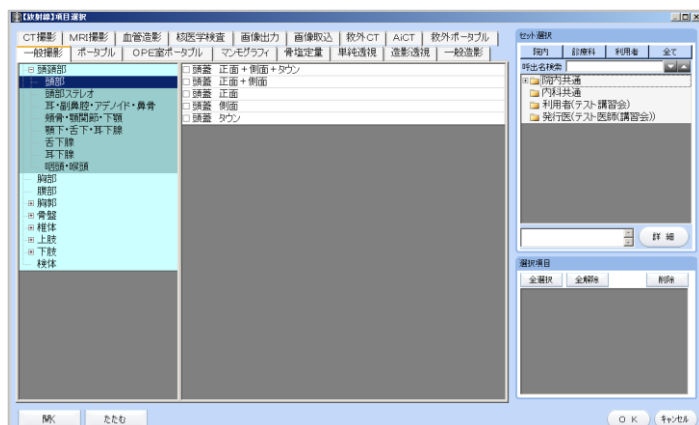

ダブルクリック

診療予定	SOAP*	全文書ビューア	放射線
放射線			
撮影項目			
2011年2月21日(月)13:00			
【保険】組合 家			
【臨床診断】テスト			
CT			
胸部 単純			

① [項目] (F3) を選択して下さい。撮影項目選択画面が表示されます。画面上部タブよりモダリティを選択し、部位、撮影項目を選択（複数選択可）して下さい。選択した項目が[選択項目]欄に表示されます。

② 右画面よりセットを展開することができます。ダブルクリックすると[選択項目]欄にセットが展開されます。必要ない項目がある場合は、項目を選択後[削除]で消すことができます。

③ 画面右下 [OK] を選択して下さい。
(この時患者の禁忌によって選択できない検査が選択されるとエラーメッセージが表示されます。)

④ 選択した撮影項目の伝票が作成されます。

3. コメント入力


3.1 コメント

- ① [撮影項目選択] 画面にて選択後、撮影項目マスタ表示設定の詳細コメント自動設定により [コメント選択画面] が自動的に表示されます。必要に応じて項目を選択して下さい。
- ② 画面下部 [読影依頼及び検査目的] 欄にフリーテキストが入力できます。
- ③ コメントは検査項目名下部に表示され、[検査目的] に記入した内容は伝票行に表示されます。
- ④ コメントを修正したい場合や手動で [コメント選択画面] を表示したい場合には、入力された検査項目行を選択し、[コメント] (F4) を選択して下さい。
- ⑤ [コメント選択画面] が表示されますので内容修正後、[OK] を選択して下さい。

3.2 コメント定型文登録

- ① [コメント選択画面]右下「定型文編集」ボタンをクリックして下さい。[定型文]画面が表示されます。
- ② 行を選択し、「挿入」をクリックで空白行を追加挿入することができます。「新規行追加」で最下に空白行を追加します。
- ③ 空白行を選択し、テキストを入力して下さい。
- ④ 行を選択し[▲] [▼] クリックで、並び替えを行うことができます。
- ⑤ 行を選択し、[削除]をクリックで行を削除することができます。
- ⑥ [OK] をクリックすると内容が保存されます。「撮影依頼及び検査目的」欄右に定型文として表示され、選択できるようになります。

3.3 禁忌コメント

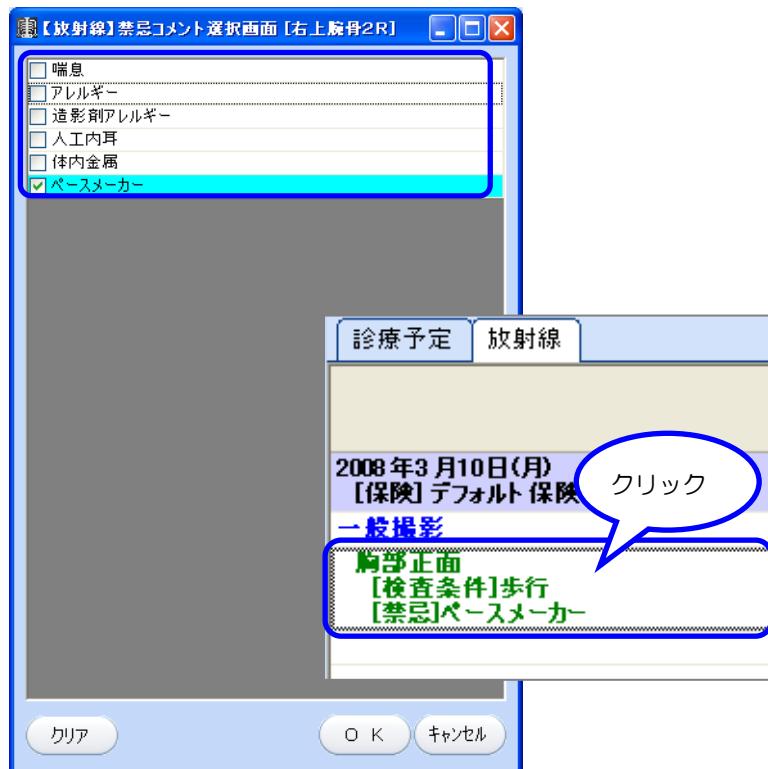

- ① 「撮影項目選択」画面にて選択後、撮影項目マスタの特別禁忌情報設定により「禁忌コメント選択」画面が表示される場合があります。（ここで登録された禁忌情報は、[患者プロフィール]情報として登録され、次回オーダ入力時より自動反映されます）
- ② 検査項目入力後に禁忌コメントのみを修正したい場合は、入力された検査項目行を選択し「禁忌」（Shift+F10）を選択して下さい。
- ③ 「禁忌コメント選択画面」が表示されますので、内容修正後、「OK」を選択して下さい。

4. 検査予定日の設定




4.1 予約なし検査

The screenshot illustrates the steps to set a no-appointment examination date:

- Top Menu:** 診療予定 (Medical Schedule) and 放射線 (Radiation). A callout bubble indicates a "ダブルクリック" (Double-click) on the 放射線 button.
- Date Selection:** 2008年4月17日(木) [保険] 労災 本. Below this, the examination item is listed: 一般撮影 (General Photography), 胸部 側面 (R-L) (Chest Side View), and 胸部 正面 (座位) (Chest Front View, Seated).
- Calendar:** A calendar for 2008年9月 (September 2008) is shown. A date is selected, and a callout bubble points to the "実施日未定" (Implementation date not determined) checkbox.
- Confirmation Screen:** 放射線 (Radiation). The status is 実施日未定 (Implementation date not determined). The examination item is listed: 一般撮影 (General Photography), 胸部正面A→P (Chest Front View A→P).


- ① [撮影項目選択] 画面にて、一般撮影等の予約なし検査を選択した場合、本日の日付で入力された状態になります。
- ② 検査項目入力後、検査日を変更したい場合は、伝票行をダブルクリックして下さい。（または [日付] (F2) を選択）カレンダーが表示されますので、日付を選択して下さい。
- ③ 実施日未定の場合は、カレンダー画面左下 [実施日未定] にチェックして下さい。下図のように伝票に [実施日未定] と表示されます。

4.2 オープン予約検査

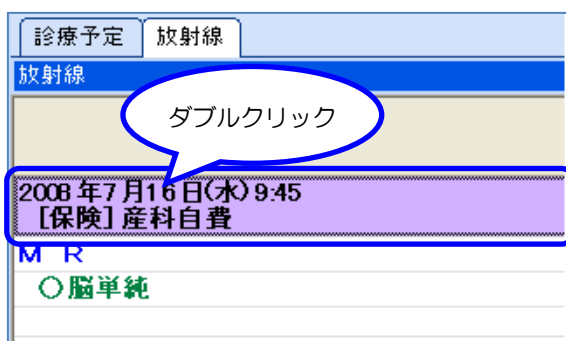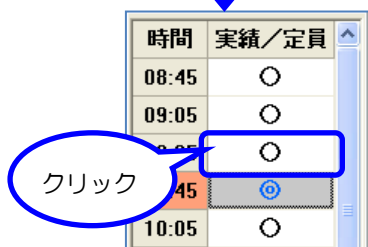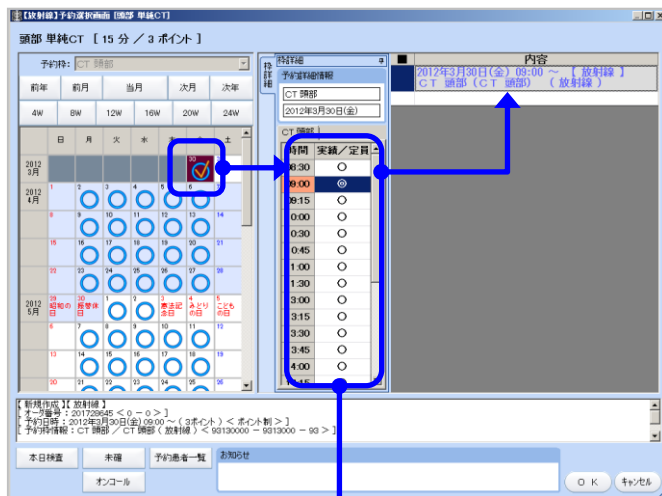


- ① 「撮影項目選択」画面にて、MRI、CT等のオープン予約検査を選択した場合、左図のような「予約選択画面」が表示されます。
- ② カレンダー内より日付をクリックして下さい。選択された日付の空き状況が画面中央に表示されると同時に、該当日で一番早い時間を自動取得します。青色「◎」の表示されている時間枠が、現在選択されている状態となります。
- ③ 時間変更する場合には、○（空枠）の時間枠をクリックして下さい。オンコールで予約を取りたい場合は右下「オンコール」を選択して下さい。
- ④ 日付・時間枠を選択後、画面右下「OK」をクリックして下さい。
- ⑤ 検査項目の日時指定後、日時を変更したい場合には、伝票行をダブルクリックして下さい。
- ⑥ 「予約選択画面」が表示されますので、再度、日時を選択して下さい。

4.3 本日検査

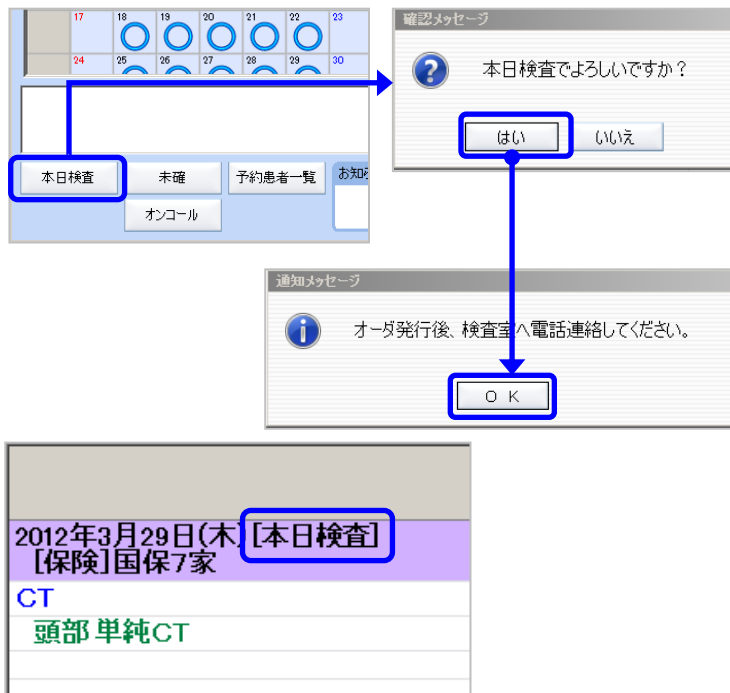

- ① 本日予約を行う場合、撮影項目選択後、[予約選択画面]が表示されましたら、画面左下の[本日検査]をクリックして下さい。
- ② 本日検査の確認メッセージを確認後、通知メッセージが表示されますので、オーダ発行後、検査室へ連絡して下さい。
- ③ 伝票行の日付横に[本日検査]と表示されます。

4.4 未確予約

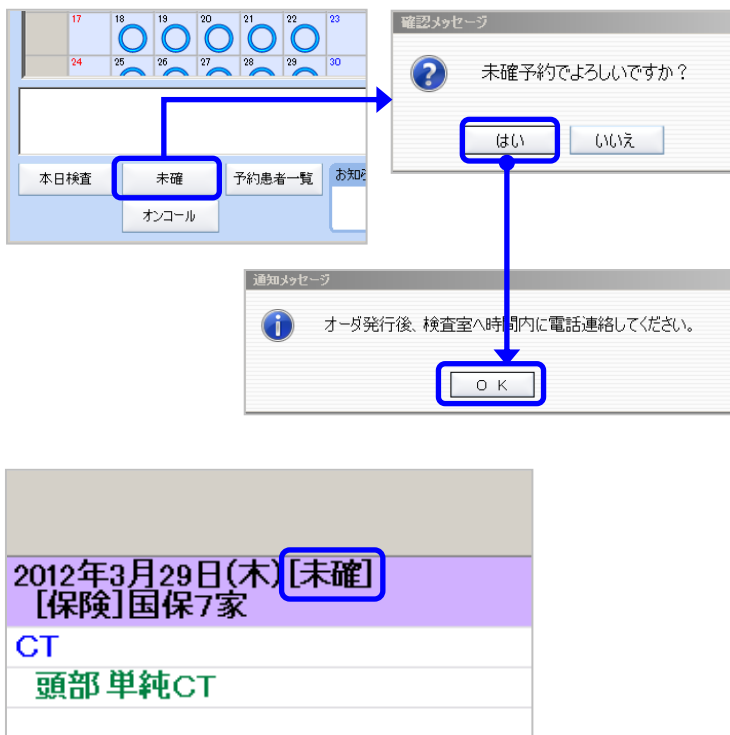

- ① 日付を確定せずオーダを発行したい場合には、撮影項目選択後、[予約選択画面]が表示されましたら、画面左下の[未確]をクリックして下さい。
- ② 未確予約の確認メッセージを確認後、通知メッセージが表示されますので、オーダ発行後、検査室へ連絡して下さい。
- ③ 伝票行日付横に[未確]と表示されます。

4.5 オンコール

3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

【新規作成】【生理検査】
 【オーダー番号】4910 <0-0>
 【予約日時】2013年1月11日(金) 09:00 ~ (30分枠)
 【予約枠情報】心エコー室検査 / 心エコー室検査 (生理)

本日検査 未確 予約患者一覧

表示切替 **オンコール**

確認メッセージ

？ オンコールでよろしいでしょうか？


はい いいえ

2013年1月11日(金) オンコール
【保険】デフォルト保険
【検査目的】テスト
超音波(心臓)
超音波(心臓)
【コメント】術前検査

- ① オンコールで検査を行う場合は、検査項目選択後、[予約選択画面]が表示されましたら、画面左下の[オンコール]をクリックして下さい。
- ② 本日検査でのメッセージを確認後、通知メッセージが表示されます。
- ③ 伝票行の日付横に[オンコール]と表示されます。


5. 繰り返し検査

5.1 同日繰り返し

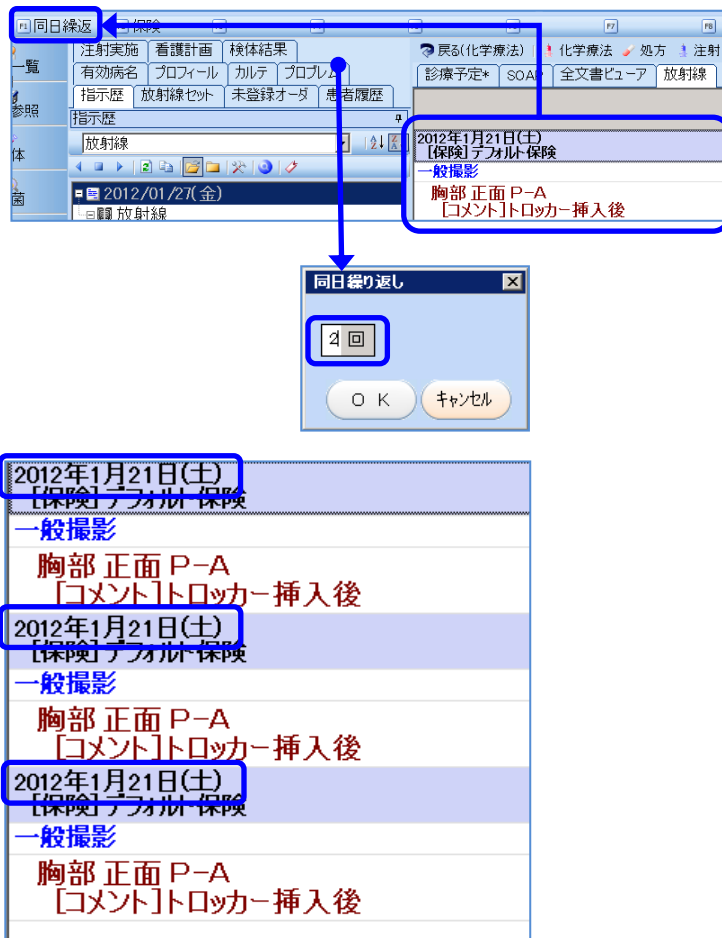

- ① 予約なし検査項目を選択した場合、同日伝票を複製することができます。
- ② 予約なし検査項目を入力後、伝票行を選択し「同日繰返し」（Shift+F1）を選択して下さい。
- ③ 「同日繰返し」画面が表示されますので、複製する伝票の回数を入力して下さい。


5.2 日付指定繰返し

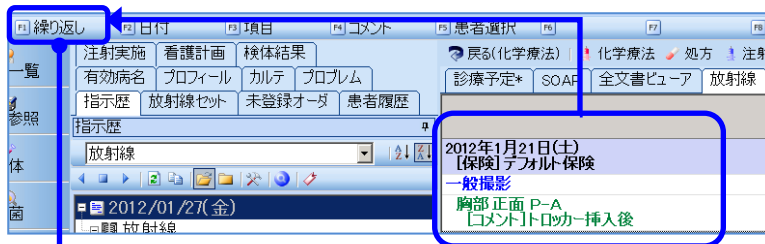



診療予定	放射線
放射線	
2008年7月15日(火)	[保険]産科自費 一般撮影 頭部正面A→P
2008年7月16日(水)	[保険]産科自費 一般撮影 頭部正面A→P
2008年7月17日(木)	[保険]産科自費 一般撮影 頭部正面A→P

- ① 予約なし検査項目を選択した場合、日付を指定して、伝票を複製することができます。
- ② 予約なし検査項目を入力後、伝票行を選択し「繰返し」(F1)を選択して下さい。
- ③ 「日付選択画面」が表示されますので、伝票を作成したい日付を選択して下さい。(既に作成されている伝票の日付を選択した場合、同日伝票が作成されますので、注意して下さい)
- ④ 「日付選択画面」の「OK」をクリックで、伝票が複製されます。

5.3 日付選択画面

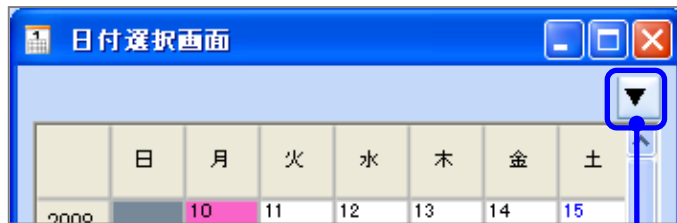

【期間指定】

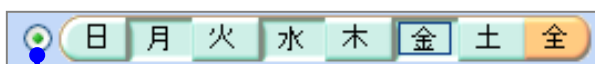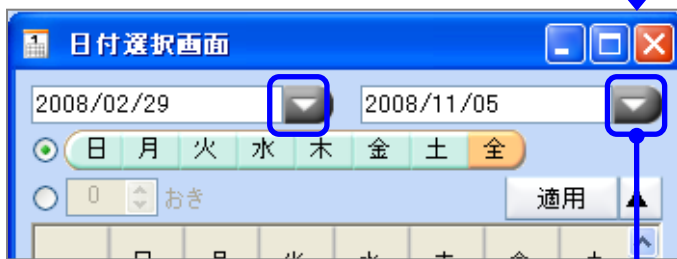

① 〔日付選択画面〕の表示日付範囲を変更したい場合は、画面上部〔▼〕をクリックして下さい。

② 〔日付選択画面〕上部に、期間範囲設定が表示されます。日付横〔▼〕をクリックでカレンダーが表示されますので、開始～終了の日付範囲を設定して下さい。

③ 〔適用〕をクリックで表示範囲が変更されます。

【曜日指定】

ラジオボタンで〔曜日指定〕を選択し、曜日ボタンを指定（凹ませた状態）後、〔適用〕をクリックでカレンダーに反映されます。

【〇日おき指定】

ラジオボタンで〔〇日おき〕を選択し、数値を入力後、〔適用〕をクリックでカレンダーに反映されます。

【曜日指定】【〇日おき指定】どちらについても、条件を戻し〔適用〕をクリックしなおすことで、カレンダーをクリアすることができます。

6. オーダ発行

6.1 診察終了

① オーダ入力後、[一括発行] (F12) または[個別発行] (Shift+F12) を選択して下さい。

② [オーダー発行]画面が表示されます。

◆診察終了◆

発行後、患者選択画面に戻ります。

◆診察継続◆

発行後、継続して該当患者を表示します。

◆診察一時終了◆

表示板へ「検査・一時終了」を送信します。

◆クリア◆

すべてのオーダーで入力された内容をクリア (削除) し、患者選択画面まで戻ります。

◆キャンセル◆

[オーダー発行]画面を閉じ、編集画面に戻ります。

◆オーダー控え◆


オーダー発行控箋印刷を行いたい場合はチェックを入れて下さい。

◆発行オプション◆

同意書等印刷を行いたい場合はチェックを入れて下さい。

7. DO

7.1 指示歴からのDO

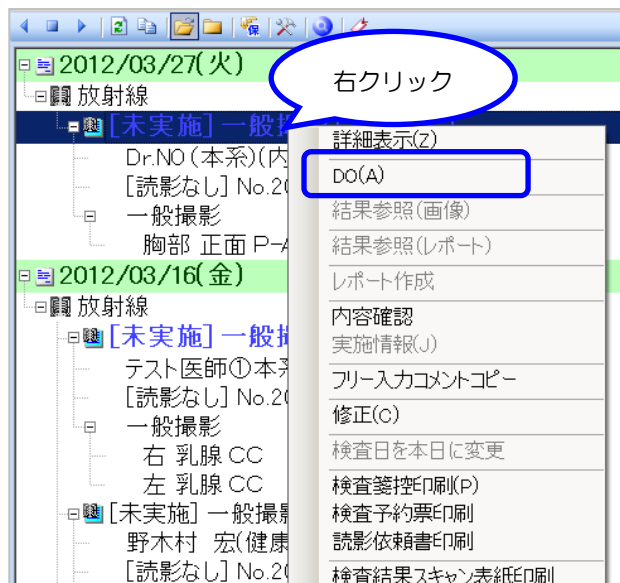


① 既に発行されているオーダ内容をDOしたい場合は、指示歴より該当のオーダを選択し、マウス右クリックメニューより「DO」を選択（または、入力画面へドラッグ）して下さい。

② DOされたオーダ内容によって、[予約日時]画面、各種コメント画面が表示されますので、入力を行って下さい。

8. オーダの修正・削除

8.1 修正

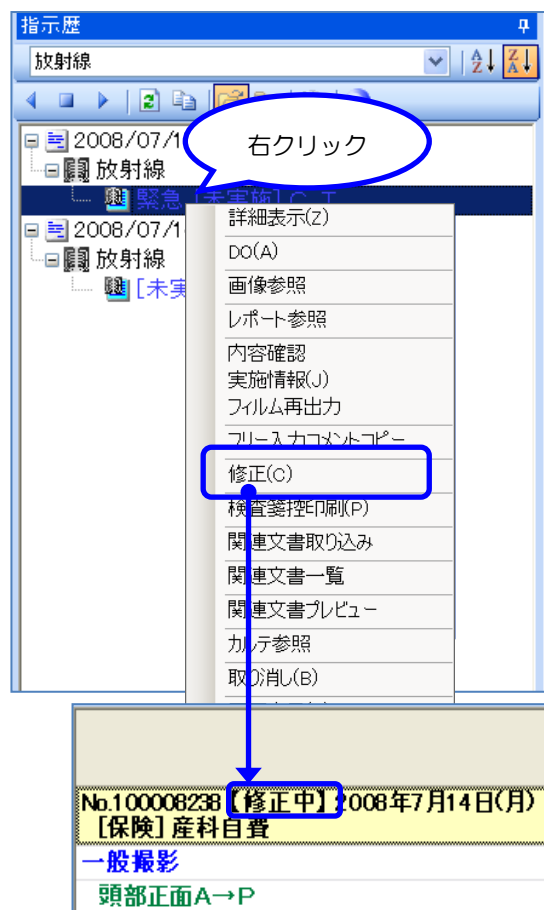


① 既に発行されているオーダ内容を修正したい場合は、指示歴より該当のオーダを選択し、マウス右クリックメニューより「修正」を選択して下さい。

② 修正の場合、「【修正中】」と表示された伝票が展開されますので、内容を修正後、[一括発行] (F12) で登録操作を行って下さい。

※修正したいオーダが、部門側で既に受付・実施・中止状態の場合は修正できませんのでご注意下さい。修正が行えない場合は、部門へご連絡下さい。

8.2 取り消し

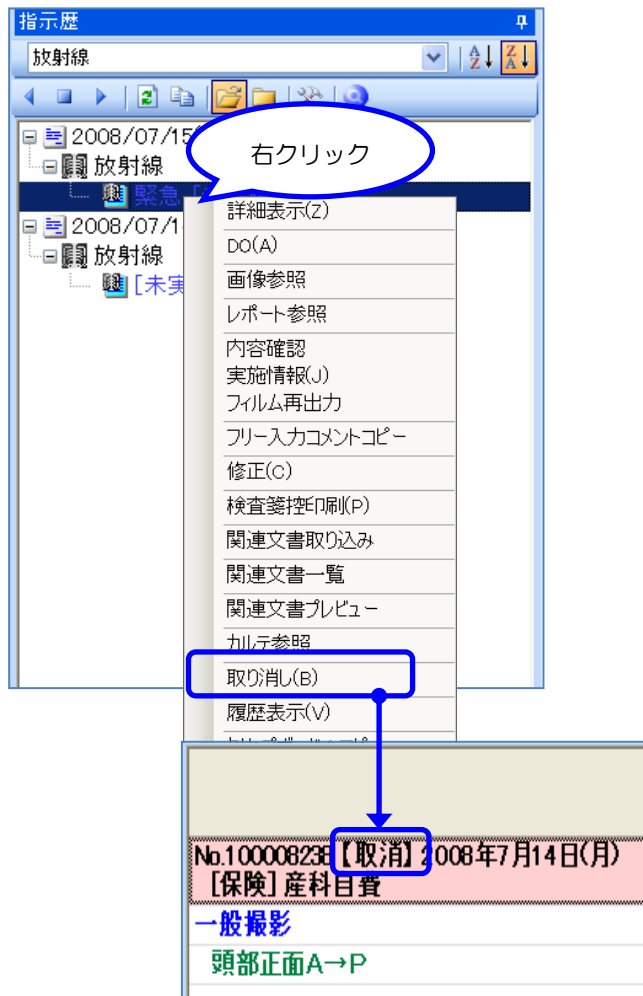


① 既に発行されているオーダを取り消したい場合は、指示歴より該当のオーダを選択し、マウス右クリックメニューより[取り消し]を選択して下さい。

② 取り消しの場合、「【取消】」と表示された伝票が展開されますので、[一括発行] (F12) で登録操作を行って下さい。

※削除したいオーダが、部門側で既に受付・実施・中止状態の場合は削除できませんのでご注意下さい。取消が行えない場合は、部門へご連絡下さい。

9. 結果参照


9.1 画像・レポート参照

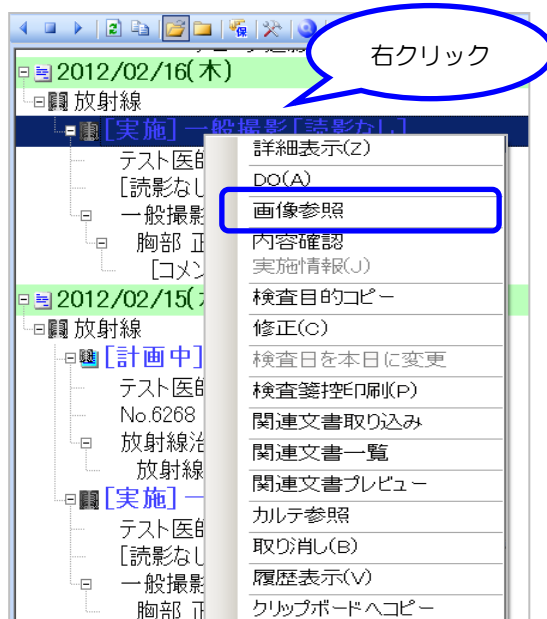

- ① 画像参照する場合には、指示歴が「実施」状態のオーダを選択し、マウス右クリックメニューより「画像参照」を選択して下さい。

10. その他の機能


10.1 内容確認

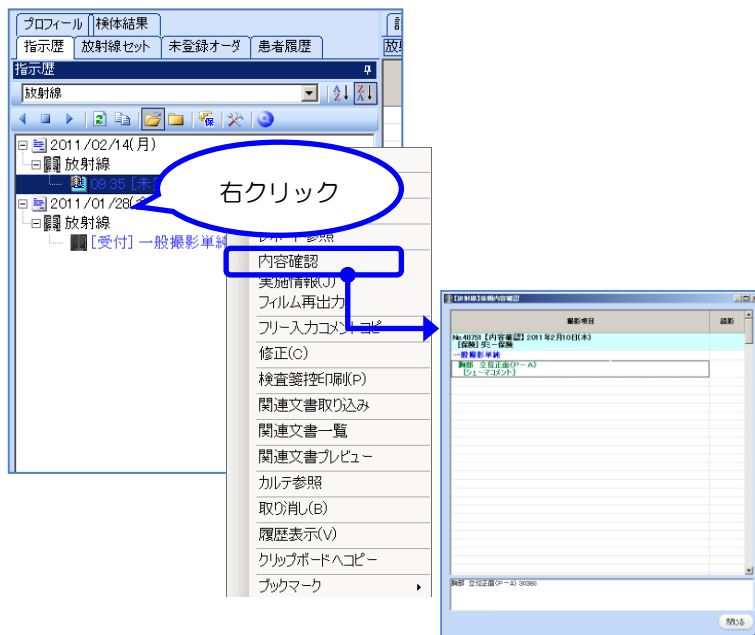

① オーダ内容を確認する場合には、指示歴から該当オーダを選択し、マウス右クリックメニューより「内容確認」を選択して下さい。

② 「依頼内容確認」画面が表示されます。

10.2 実施情報

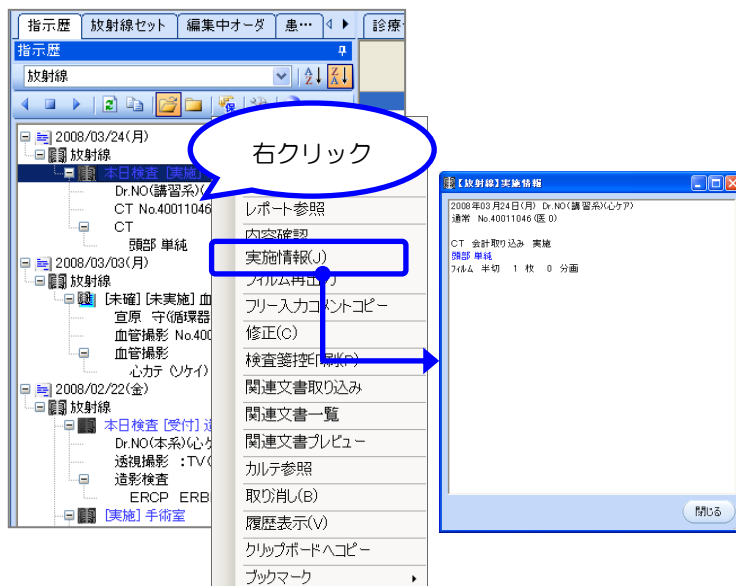

① 実施情報を確認したい場合は、実施済みオーダを選択し、右ボタンクリックメニューより「実施情報」を選択して下さい。

② 実施情報画面が表示されます。また医師宛のコメントがある場合には、この画面にて部門側から確認することができます。