


検体検査

Medi-Aibis


1. 検体検査画面	1
1.1 検体検査入力画面	1
2. 検査伝票作成	1
2.1 検査項目の選択	1
2.2 セット展開	2
2.3 Do 展開	3
2.4 日付変更	3
2.5 伝票の追加	4
2.6 保険選択	4
3. 入力補助機能	5
3.1 同日繰り返し	5
3.2 期間繰り返し	5
3.3 至急	6
3.4 コメント	6
3.5 材料指定	7
4. オーダ発行	8
4.1 診察終了	8
5. オーダの修正・削除	9
5.1 検査日を本日に変更する	9
5.2 発行済オーダの修正	9
5.3 発行済オーダの削除	10
6. 結果参照	10
6.1 指示歴からの結果表示	10
6.2 結果一覧からの結果参照	11
7. 検体検査結果速報	12
7.1 検査結果通知	12

1. 検体検査画面

1.1 検体検査入力画面

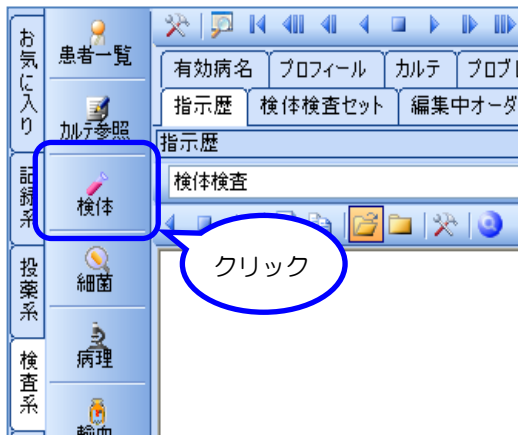


- ① 画面左側、機能ボタン〔検査系〕タブ内〔検体〕をクリックして下さい。

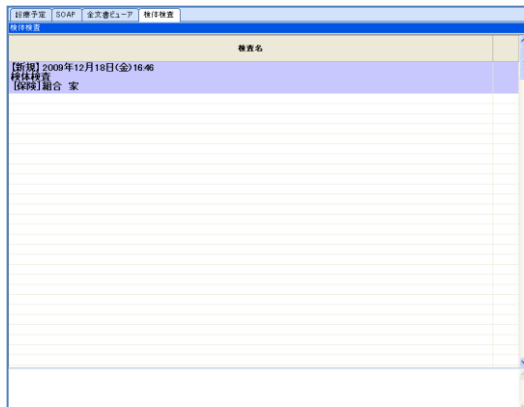

- ② 検体検査オーダ入力画面が表示されます。

2. 検査伝票作成

2.1 検査項目の選択

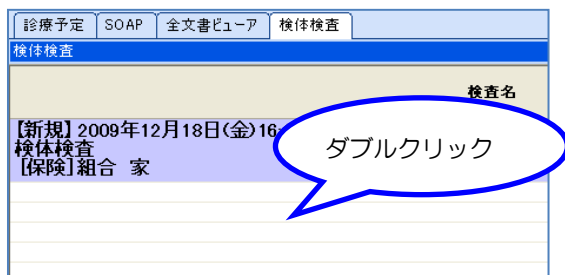

- ① 〔項目〕(F3)を選択または伝票行をダブルクリックして下さい。〔項目選択〕画面が表示されます。項目を選択(複数選択可)して下さい。

- ② 画面右下[OK]を選択して下さい。



検体検査*

検査名

【新規】2008年9月4日(木)14:02
*検体検査
【保険】政府管家

全血

末梢血液算定(材料:全血)*
末梢血液像(材料:全血)*

2.2 セット展開

指示歴 検体検査セット 未登録オーダー 検体検査*

処方セット

院内

呼出名検索

院内共通

セット①

セット②

内科共通

利用者(テスト医師①(テスト系))

ダブルクリック

【新規】2008年9月4日(木)14:02
*検体検査
【保険】政府管家

全血

末梢血液算定(材料:全血)*
末梢血液像(材料:全血)*

ドラッグ&ドロップ

9990101 講習101 (内科)

院内検査

AST

ALT

LDH

ALP

CPK

AMY

血糖

CRP

総蛋白

BUN

クレアチニン

Na

K

総ビリルビン

AST

ALT

LDH

ALP

CPK

AMY

血糖

CRP

血液

血算 WBC

ダブルクリック

【新規】2012年3月27日(火)14:21
*検体検査
【保険】政府管家

生化学

総蛋白 *

BUN *

クレアチニン *

Na *

K *

総ビリルビン *

AST *

ALT *

LDH *

ALP *

CPK *

AMY *

血糖 *

CRP *

血液


血算 WBC *

③ 指定した検査項目が伝票画面に表示されます。

① [指示歴] 画面上 [検体検査セット] タブを選択して下さい。セットは「院内共通」「診療科共通」「利用者固有」セットでフォルダが分かれており、各フォルダ名上をダブルクリックすると階層下のセット名が表示されます。該当セット名上をダブルクリックで選択またはセット名をマウス(ドラッグ&ドロップ)操作で、入力画面内へ移動させ展開することができます。

② 項目選択画面からセットを展開する場合は、画面左側セット名をダブルクリックして下さい。セット内の検査項目が選択された状態になります。
※展開した項目を全て取消したい場合などは、画面左下 [クリア] ですべてのチェックを解除できます。


2.3 Do 展開

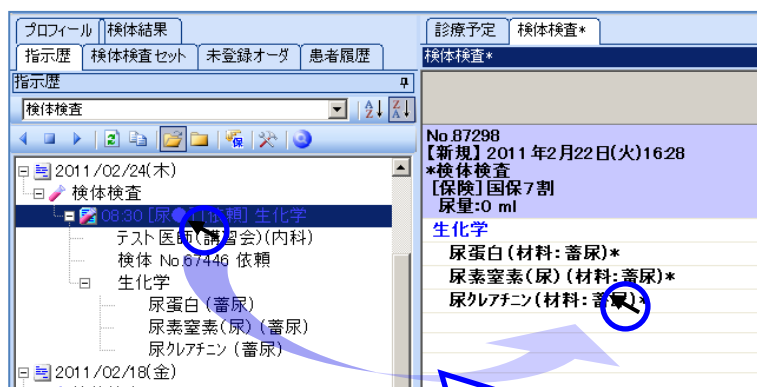


ドラッグ&ドロップ

- ① 指示歴に表示されている発行済みの検査をマウス（ドラッグ&ドロップ）操作で、入力画面内へ移動させ展開することができます。

2.4 日付変更

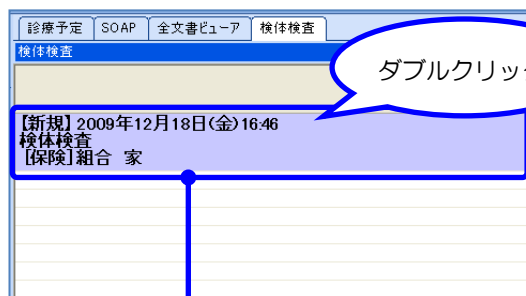


ダブルクリック

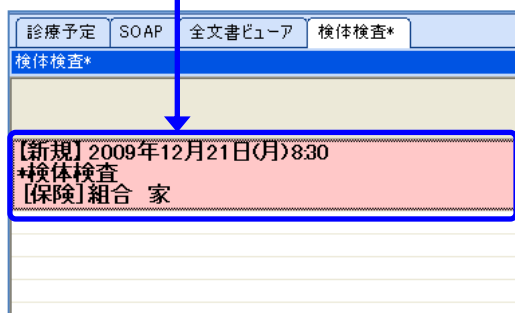

- ① 検査日の初期値は「本日」となっています。検査日を変更したい場合などは、伝票行（青色行）をダブルクリックして下さい。（[検査日]（F2）でも同様）

- ② [予約指定] のカレンダー画面が表示されますので、日付を選択して下さい。（実施日未定の場合には左下の「実施日未定」にチェックを入れて下さい）

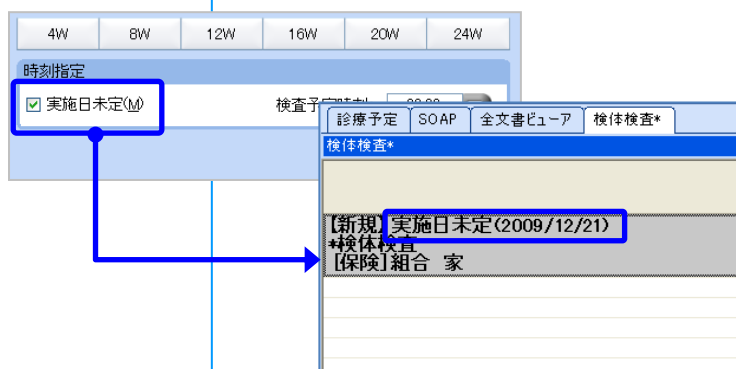

2.5 伝票の追加



No.30227095
【新規】2008年3月31日(月)14:25
*検体検査
【保険】国保7本 老27 高額 重度

生化学検査
ALP (材料:03 血清)
ALP 旧法 (材料:03 血清)
γ-GTP (材料:03 血清)
γ-GTP 旧法 (材料:03 血清)

ダブルクリック or F9

確認メッセージ
新しく伝票を作りますよろしいですか?
はい いいえ

No.30227095
【新規】2008年3月31日(月)14:25
*検体検査
【保険】国保7本 老27 高額 重度

ALP (材料:03 血清)
ALP 旧法 (材料:03 血清)
γ-GTP (材料:03 血清)
γ-GTP 旧法 (材料:03 血清)

【新規】2008年3月31日(月)14:27
*検体検査 (院内)
【保険】国保7本 老27

- ① 新規伝票行を作成する場合は、空行を選択後ダブルクリック、または[新オーダー] (F9) を選択して下さい。ダブルクリックをした場合は確認メッセージが出てきます。
- ② カレンダー画面が表示されますので、日付を選択して下さい。
- ③ 新規伝票行が作成されますので検査項目を選択して下さい。

2.6 保險選折

No.30227095
 【新規】2008年3月31日(月)14:25
 *検体検査
 [保険]国保7本 老27 高額 重度
 生化学検査
 ALP (材料:03血清)
 ALP旧法(材料:03血清)
 γ-GTP (材料:03血清)

保険

保険コード 00117 氏名 753 9(B)

コード	名称	記号・番号	適用開始日	適用終了日	入部/外
10	診断管理		2003年6月11日		入部
11	診断管理	特例有	2003年09月11日		入部
12	診断管理	重度	2004年12月22日		入部
13	診断管理	高額	2006年01月11日		入部
18	診断管理	特例有 重度	2006年12月22日		入部
20	治療		2003年06月11日		入部
30	療育		2003年06月11日		入部


課定料

No	公費負担番号	期割番号
51	51004021	

- ① 伝票ごとに保険を変更する場合には、変更したい伝票行を選択し、[保険] (Shift+F2) を選択して下さい。
- ② [保険選択]画面が表示されますので、任意の保険を選択して下さい。


3. 入力補助機能

3.1 同日繰り返し

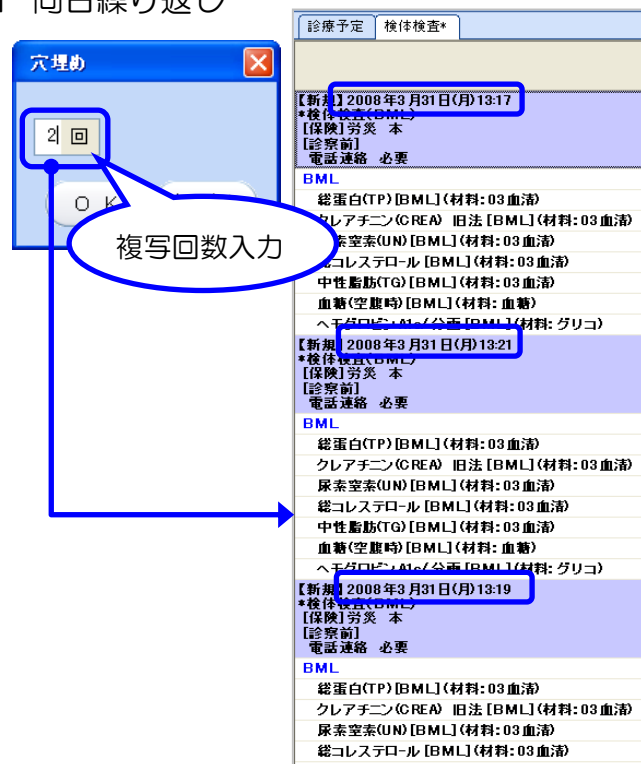

- ① 繰り返し検査内容を入力後、[同日繰返] (Shift+F1) を選択して下さい。
- ② 回数を入力する画面が表示されます。
伝票の複写回数を入力して下さい。
- ③ 選択した伝票と同日付伝票が複製されます。

3.2 期間繰り返し

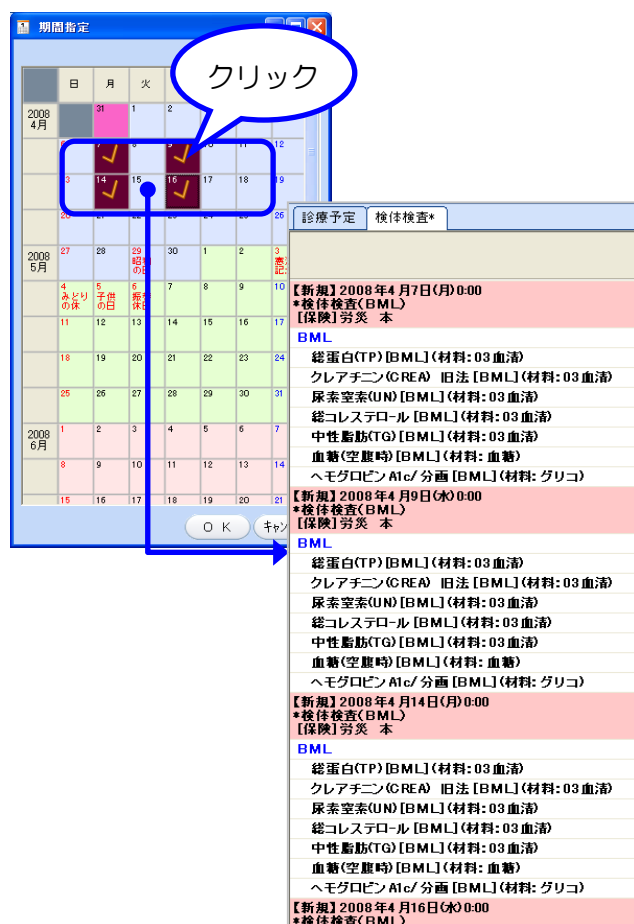

- ① 繰り返し行う検査内容を1オーダ分入力後、[繰り返し] (F1) を選択して下さい。
- ② カレンダーが表示されますので、指定日付を選択して下さい。
- ③ 指定した日付分の伝票が複製されます。

3.3 至急

部門

AST

ALT

AST (GOT) (材料:血清)*

ALT (GPT) (材料:血清)*

HBs抗原(精密測定) (材料:血清)*

HBs抗体(精密測定) (材料:血清)*

HCV抗体(精密測定) (材料:血清)*

HIV1・2抗体(精密測定) (材料:血清)*

検査名

【新規】2009年3月5日(木)11:48

*検体検査

【保険】デフォルト保険

血清

AST (GOT) (材料:血清)*

ALT (GPT) (材料:血清)*

HBs抗原(精密測定) (材料:血清)*

HBs抗体(精密測定) (材料:血清)*

HCV抗体(精密測定) (材料:血清)*

HIV1・2抗体(精密測定) (材料:血清)*

緊急

全て選択

全て解除

3.4 コメント

受付コメント

検体検査

選択

本人区分

本人

本人以外

その他

尿量: ml

身長: cm

体重: kg

審尿時間: 時間

妊娠週: 週

自己申告血液型

ABO式: Rh:

診察前検査

OK

キャンセル

【検体検査】2009年12月18日(金)16:56

*検体検査

【保険】総合 家

診察前

生化学検査

部尿CRT (材料:尿)*

指示歴

検体検査セット

未登録オーダ

指示歴

検体検査

2011/01/05(水)

08:30 [依頼] 生化学, BML

2011/01/06(木)

08:30 [依頼] 生化学

2011/01/07(金)

08:30 [依頼] 血液, 生化学

08:30 [依頼] 血液, 生化学

右クリック

詳細表示(2)

DO(A)

内容確認

コメント修正

結果表示(2)

結果Web参照

修正(2)

検査日を本日に変更

検査箋印刷(2)

薬剤箋印刷(2)

検査ラベル再出力

① [至急] (F10) を選択して下さい。至急依頼可能な検査項目が「至急指定画面」内に表示されます。

② 至急依頼する項目のチェックボックスにチェックを入れて下さい。(画面左下「全て選択」をクリックすると全項目にチェックされます)

③ 至急依頼を出した項目は、伝票の各項目右欄に「急」が表示されます。

① [コメント] (F4) を選択して下さい。
※伝票が複数ある場合は、該当伝票行を選択後に行って下さい。

② 「受付コメント」では、定型コメント2個、フリーコメント(全角7文字以内)1個の入力が可能です。

③ 左下の「診察前検査」にチェックすると伝票行に「診察前」と表示されます。

④ 検体検査の検査項目に「CCr」などの尿量入力が必要な項目は、検査依頼コメント画面に入力して下さい。

⑤ オーダ発行後は指示歴から右クリックメニューで「コメント修正」を選択して下さい。「検査依頼コメント」画面が表示されます。

- ⑥ 尿量や蓄尿時間を追記できます。該当箇所を入力後、[OK]をクリックし、登録します。

3.5 材料指定

- ① 検査項目を入力後、[材料] (F11) を選択して下さい。
- ② 画面右側、[検査材料]項目部分をクリックして下さい。材料の選択肢がある場合は、左図のように表示されます。

4. オーダ発行

4.1 診察終了

① オーダ入力後、[一括発行] (F12) または[個別発行] (Shift+F12) を選択して下さい。

② [オーダー発行]画面が表示されます。

◆診察終了◆

発行後、患者選択画面に戻ります。

◆診察継続◆

発行後、継続して該当患者を表示します。

◆診察一時終了◆

表示板に「検査・一時終了」を送信します。

◆クリア◆

すべてのオーダーで入力された内容をクリア (削除) し、患者選択画面まで戻ります。

◆キャンセル◆

[オーダー発行]画面を閉じ、編集画面に戻ります。

◆オーダー控え◆


オーダー発行控箋印刷を行いたい場合は、チェックを入れて下さい。

◆発行オプション◆

印刷を行いたい場合は、チェックを入れて下さい。


5. オーダの修正・削除

5.1 検査日を本日に変更する

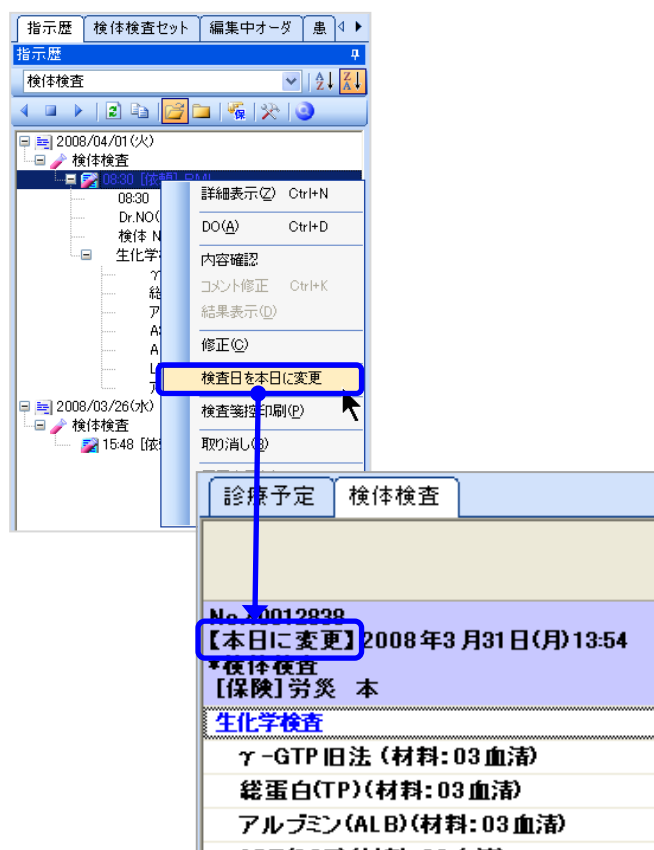


- ① [指示歴] より、実施日未定、または依頼状態（ラベル未出力）のオーダを選択します。
- ② マウス右ボタンクリックし、メニューより「検査日を本日に変更」を選択して下さい。
- ③ 「【本日に変更】」と表示された伝票が展開されますので、[一括発行]（F12）で登録操作を行って下さい。

5.2 発行済オーダの修正

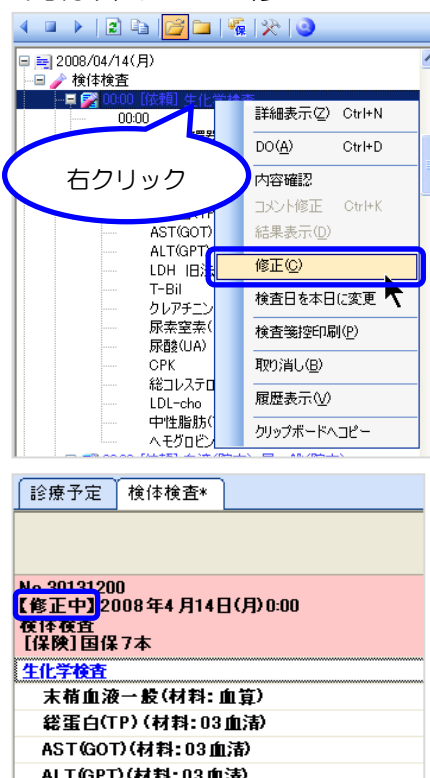

- ① オーダを修正したい場合は、指示歴より該当のオーダを選択し、マウス右ボタンクリックメニューより「修正」を選択して下さい。
- ② 修正の場合、「【修正中】」と表示された伝票が展開されますので、内容を修正後、[一括発行]（F12）で登録操作を行って下さい。


5.3 発行済オードの削除

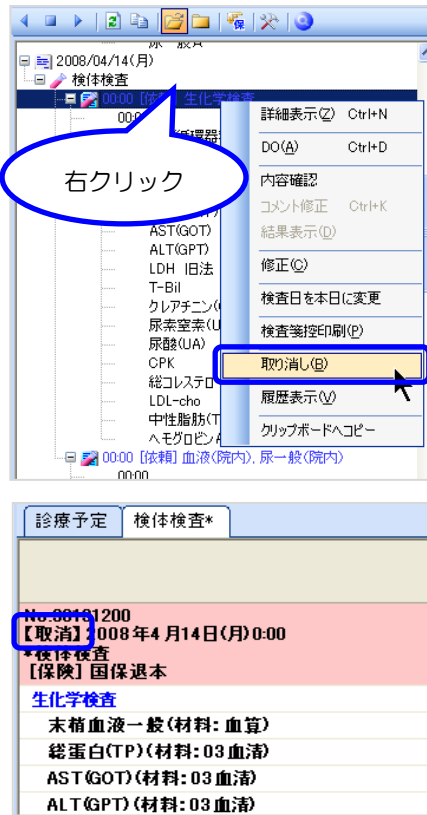

- ② 取り消しの場合、「【取消】」と表示された伝票が展開されますので、[一括発行] (F12) で登録操作を行って下さい。


6. 結果参照

6.1 指示歴からの結果表示

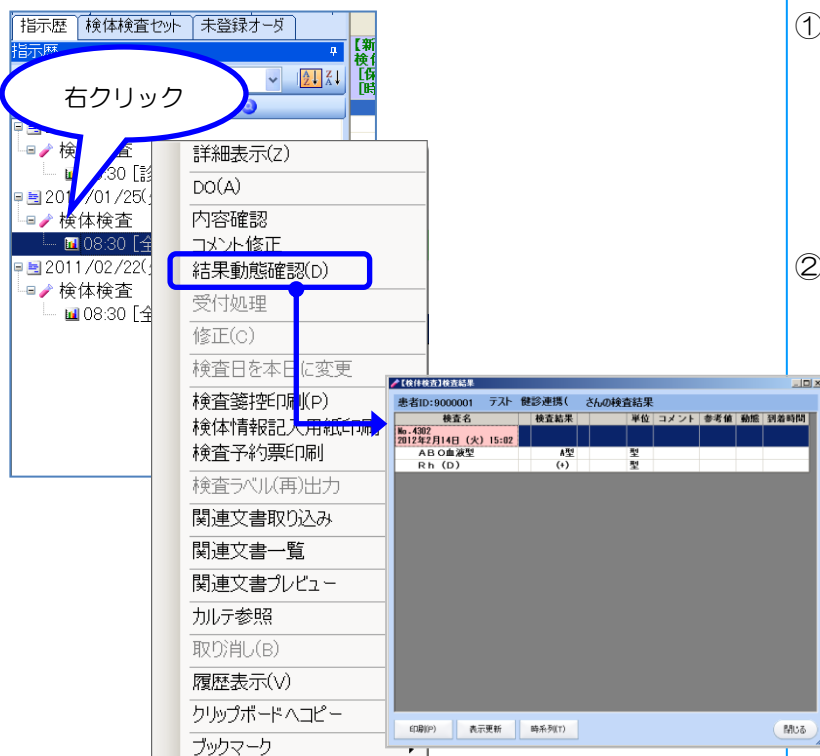

- ※検査結果の出ているオーダーの場合に
メニューが選択できます。

6.2 結果一覧からの結果参照

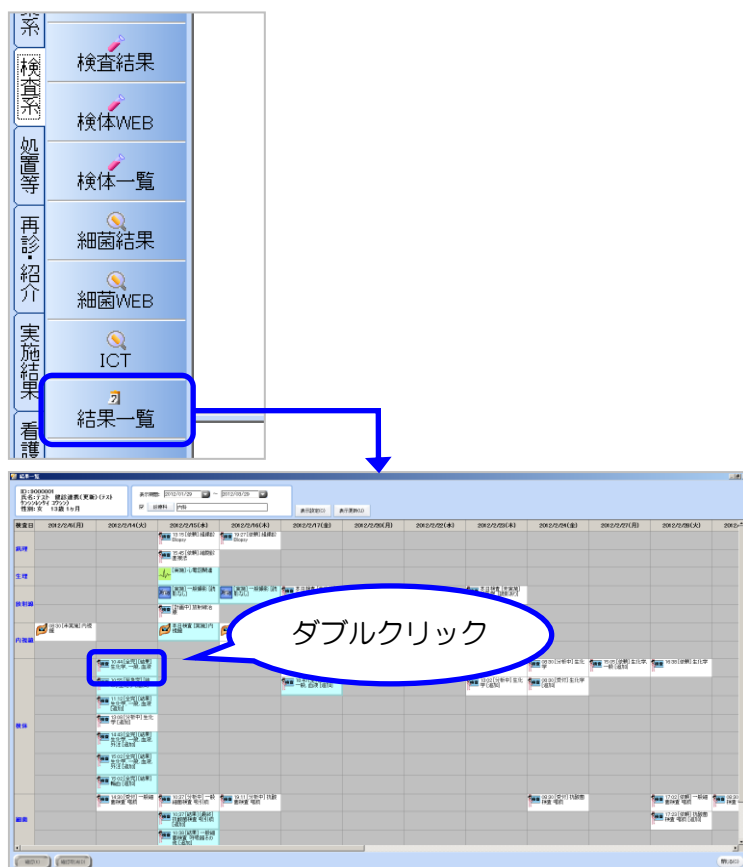


- ① 画面左側、機能ボタン [検査系] タブ内 [結果一覧] または、[実施結果] タブ内 [結果一覧] をクリックして下さい。
- ② [結果一覧] 画面が表示されます。実施済み検査枠をダブルクリックすると検査結果が表示されます。※詳しい操作内容は【結果一覧】マニュアルをご参照下さい。

7. 検体検査結果速報

部門システムと連携を行うことで、検査結果速報のお知らせを通知する機能です

7.1 検査結果通知

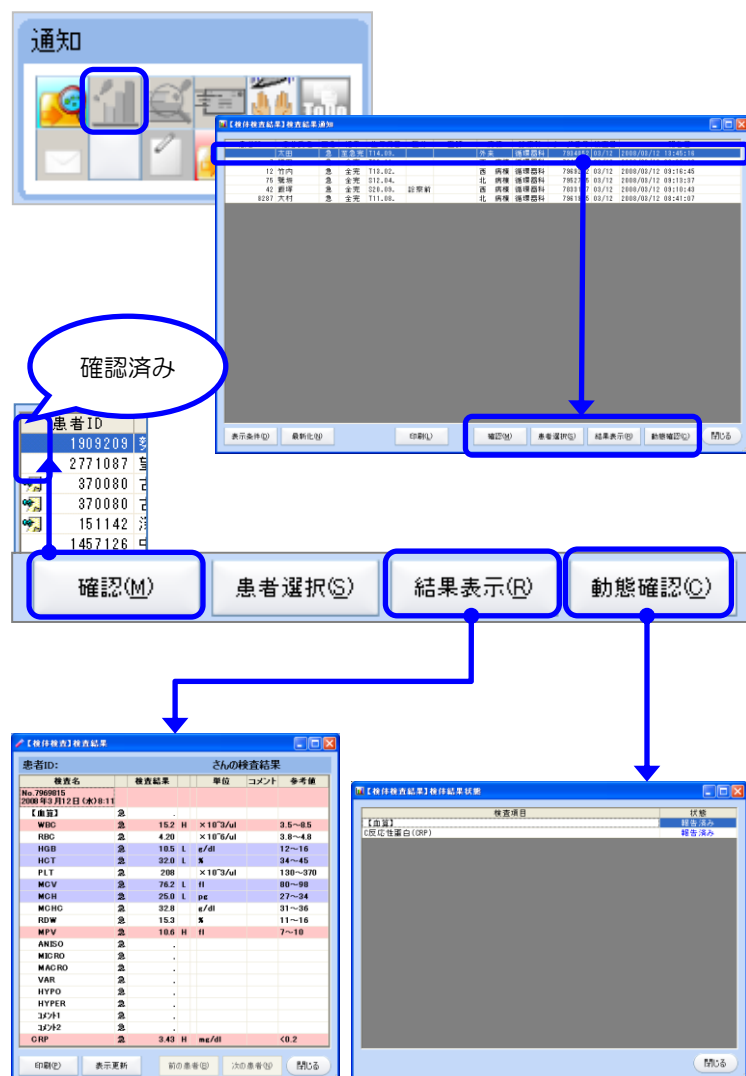

- ① 「検体結果通知表示設定」で設定したオーダの検査結果到着を、画面上部、[通知] 内 [検体検査結果通知] アイコンアニメーションでお知らせします。
(他の患者を選択していた場合にも、動作します)
- ② 通知アイコンをクリックして下さい。
[検査結果通知] 画面が表示されます。
検査結果を参照する場合は、確認したい患者を選択後、画面下 [結果表示] をクリックして下さい。(印刷も可能です)
- ③ [動態確認] をクリックで、検査結果動態(状態)が確認できます。
- ④ 検査結果参照後、[確認] をクリックすると選択されたオーダが確認状態となります。確認された患者ID横に、メモマークが表示されます。

表示条件(D)

最新化(N)

【検体検査結果】検体結果通知表示設定

対象検査日

☒ 本日分(A)

☐ 日付指定

___/___/___

区分

☐ 未確認分のみ(C)

☐ 確認分のみ(E)

☒ 全て(F)

宛先

☐ 自分宛(G)

☒ 診療科宛(H)

表示順

☒ 結果日時の昇順(U)

☐ 結果日時の降順(D)

対象入外区分

☐ 全てΦ ☐ 自動(L)

☒ 外来患者(J)

☐ 入院患者(K)

☒ 至急分のみ対象とする

☐ 通知内容を自動的に印刷

☐ 当該診療科のみを対象とする

初期値として登録

OK キャンセル

⑤ 「検体結果通知」画面の表示条件を設定することができます。画面左下「表示条件」をクリックして下さい。

⑥ 「検体結果通知表示設定」画面が表示されます。

【対象検査日】

「本日分」「日付指定」を選択できます。

【区分】

「未確認分のみ」「確認分のみ」「全て」を選択できます。

「確認分のみ」については、「結果通知」画面下「確認」ボタンをクリックしたものを対象とします。

【宛先】

「自分宛」利用者が医師の場合は、自分の発行したオーダを表示します。利用者が医師以外の場合は、選択されている発行医分のオーダを表示します。

「診療科宛」画面上部「発行診療科」で表示されている診療科分を対象とします。

【表示順】

昇順・降順を切り替えます。

【対象入外区分】表示対象者の区分を選択できます。「自動」は端末の設置場所に基つき自動で表示されます。

【至急分のみ対象とする】

至急検査結果が報告されたタイミングで速報のお知らせを行います。

【通知内容を自動的に印刷する】

速報と同時に検査報告書を印刷します。

【当該診療科のみを対象とする】

自科でオーダ発行した検査のみの速報をお知らせします。

【初期値として登録】

ユーザーごとに保存されます。次回以降も表示条件が反映されます。