

短文セツト


Medi-Aibis

株式会社 **BSNアイネット**

1. 短文登録画面	1
1.1 モード切り替え	1
2. 全患者共通・患者指定セット	1
2.1 短文セット作成	1
2.2 フォルダ作成	2
2.3 短文セット選択	2
2.4 短文セット修正	3
2.5 短文セット削除	3

1. 短文登録画面


1.1 モード切り替え

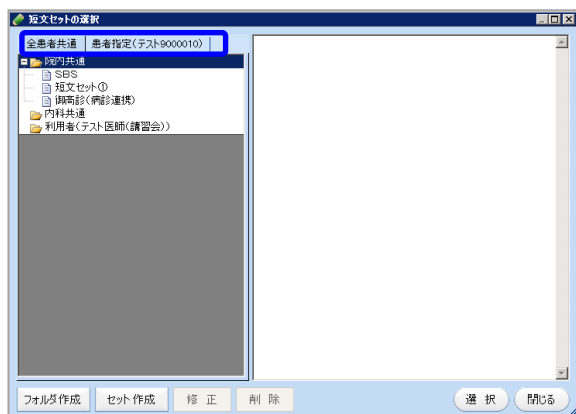

- ① キーボード右上「Pause」キーを押下して下さい。
- ② (デスクトップの場合は、ファンクションキーF12から右へ3番目、ノートPCの場合は、ファンクションキーF12から右へ2番目)
- ③ [短文セットの選択]画面が表示されます。
- ④ 画面上部のタブより「全患者共通」セットと「患者指定」セットの画面に切り替えることができます。


2. 全患者共通・患者指定セット

2.1 短文セット作成

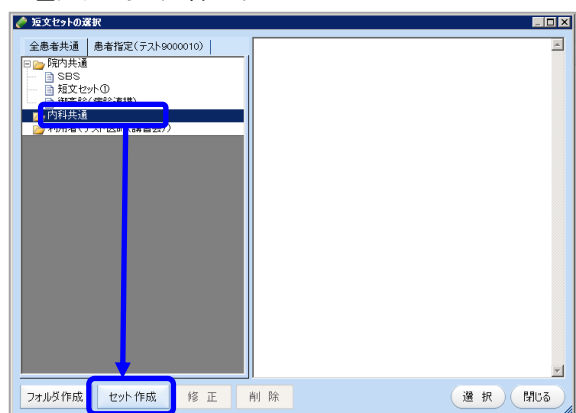

- ① [短文セットの選択]画面にて単語を登録する場合には、セットを作成したいフォルダを選択し、[セット作成]ボタンをクリックして下さい。(以下の操作は「全患者共通」セット、「患者指定」セット共通の動きです。)
- ② [短文セットの新規作成]画面が表示されます。「タイトル」に登録したい短文のセット名を入力し、「テキスト」に登録短文を入力して下さい。(「よみがな」は任意で登録が可能です。) タイトル・よみがなは最大全角 50 文字、テキストは最大全角 2000 文字入力ができます。
- ③ 「OK」をクリックすると短文として登録されます。


2.2 フォルダ作成

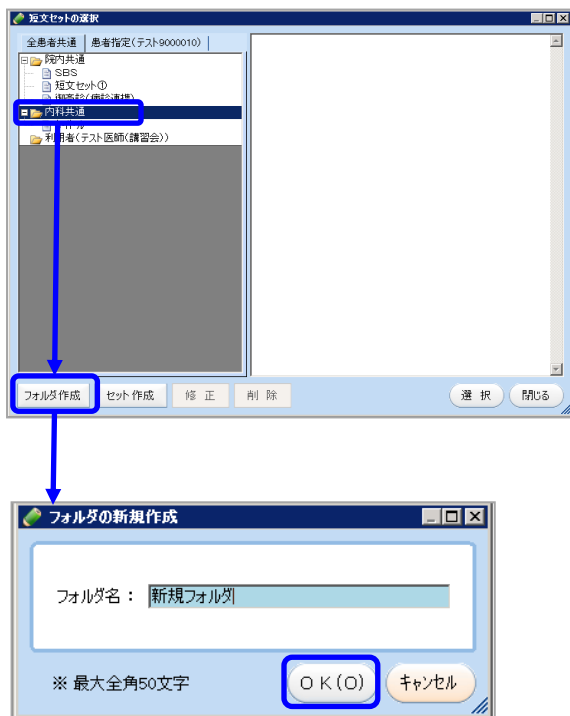

① 「院内共通」「科共通」「利用者」のそれぞれのフォルダ下にフォルダを作ることができます。フォルダを作成したいフォルダを選択し、[フォルダ作成] ボタンをクリックして下さい。

② [フォルダの新規作成] 画面が表示されます。「フォルダ名」にフォルダ名称を入力し、[OK]ボタンで登録します。



2.3 短文セット選択

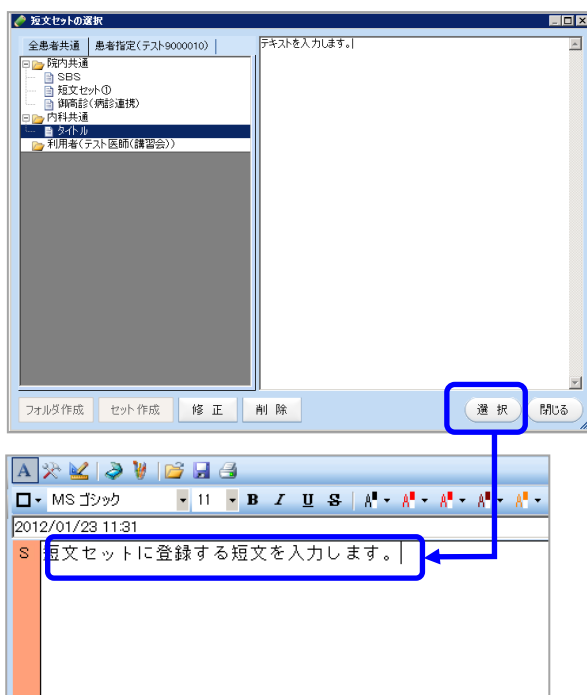

① [短文セットの選択]画面より適用したい短文を選択し、[選択] ボタン、または Enter キーを選択して下さい。

② 単選択短文が記載画面に表示されます。



2.4 短文セット修正

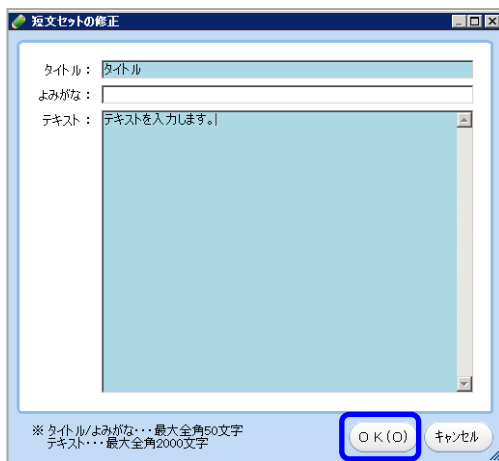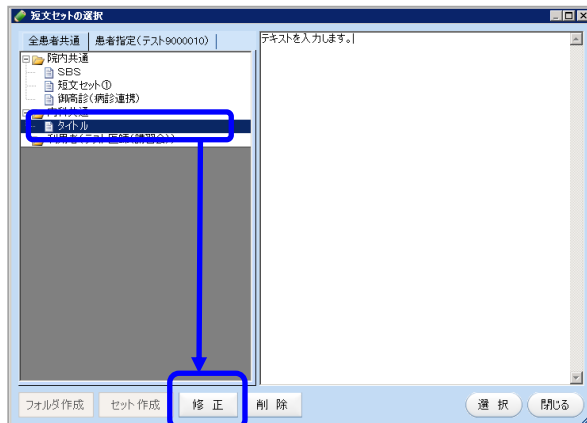

① [短文セットの選択]画面より修正したい短文セットを選択し、[修正] ボタンをクリックして下さい。

② [短文セットの修正] 画面が表示されます。修正箇所を修正し、[OK] ボタンで修正となります。

2.5 短文セット削除

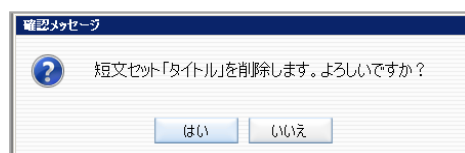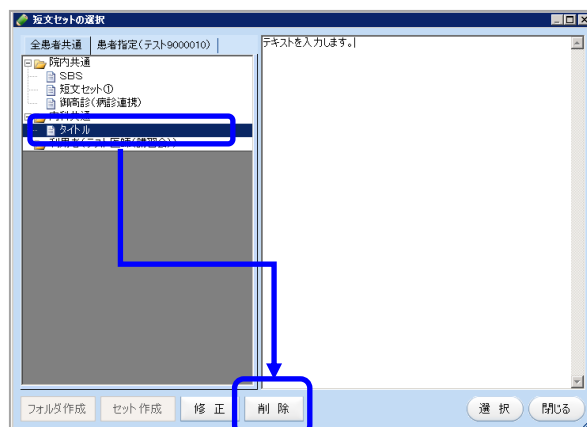

① [短文セットの選択]画面より削除したい短文セットを選択し、[削除] ボタンをクリックして下さい。

② 確認メッセージが表示されます。削除する場合は「はい」をクリックして下さい。選択文書が削除されます。